

Produkt Spezifikation

- ***** STANDARD-ELEVATIONSTYP
- ➡ HÄNGESCHLÄUCHE INSTRUMENTENABLAGE
- **■** ZURÜCKLEHNBARER PATIENTENSESSEL

ANCAR-S.COM

Eine moderne, schlanke und ergonomische Behandlungseinheit, komplett aus Aluminium gefertigt, die Ihnen die tägliche Arbeit erleichtert und jahrzehntelang hält.





	S3	H	RC	
Ergonomie und Komfort	Möglichkeit, die Speifontäne auf der linken Seite des Sessels für Linkshänder anzubringen (bei Bestellung bitte angeben).	In der Position verstellbare, abnehmbare und sterilisierbare Instrumentenhalter	90° verstellbare Rückenlehne mit automatisch ausziehbarer Fußstütze Bessere Kommunikation zwischen Arzt	
	bestelling bitte angeben).	Selbstkompensierender Arm für die	und Patient.	
	Möglichkeit, den Arm der Absaugschläuche an der Rückseite des Sessels zu befestigen, um ihn	Instrumentenablage mit Gaskolben und ohne zusätzliche Bremse, der es Ihnen ermöglicht, die	Erleichtert Frontalaufnahmen	
	beidhändig zu machen (bei der Bestellung angeben).	Hauptinstrumentenablage zu positionieren und automatisch zu verriegeln, ohne dass Sie etwas tun	Erleichtertes Hinsetzen und Aufstehen für Patienten, insbesondere bei eingeschränkter Mobilität.	
	Inklusive kabellosem Fußpedal	oder eine Taste drücken müssen.		
	Speifontäne kann um 70° gedreht werden, um einen besseren Zugang zum Patienten von beiden Seiten zu	Sehr leichtgängige Bewegung des Instrumentenarms	Frontalansicht des Patienten, keine verzerrte Mittellinienansicht.	
	ermöglichen	Ergonomische Griffe an der		
	Höhenverstellbarer Assistenzarm mit kapazitiver Tastatur	Instrumentenablage für eine bessere Handhabung		
Hygiene	Speifontäne und Becken, Wasserhahn und Becherhalter sind abnehmbar und können sterilisiert werden	Silikonmatte auf der Instrumentenablage ist abnehmbar und sterilisierbar	Natürlich sitzen: Bessere Kommunikation zwischen Arzt und Patient.	
	Standard-Saugschläuche abnehmbar und thermodesinfiziert		Verringert die Ängste der Patienten	
	Konzipiert für einfache Reinigung und Desinfektion			
Technologie	Stuhlbewegungen über Steuerpedal und Tastatur möglich (Haupt- und Assistent)			
	Helligkeitsregelung der Lampe am Bildschirm			

Touch expert PRO™



7-Zoll-Multitouch-Farbbildschirm, basierend auf Android, orientierbar, mit IPS-Technologie und einfach zu bedienen.

Unbegrenzte Anzahl von Benutzerprofilen mit eigenen Einstellungen

Anzeige von Klinik, Datum und Uhrzeit sowie die Möglichkeit, das Logo der Klinik auf jedem Bildschirm darzustellen

Hochladen von Röntgenbildern und Fotos, Visualisierung von Bildern, Videos und Bedienungsanleitungen des Geräts

Programmierung der Scaler-Arbeitsparameter in ENDO, PERIO, SCALER sowie des Arbeitsbereichs und der Lichtintensität der Instrumente Einstellung der Betriebsparameter des Mikromotors (mit ENDO-Funktionen): Steuerung des Drehmoments in Ncm, direkte oder umgekehrte Drehung, Bewässerungsmodus (Spray, Drehmomentsteuerung in Ncm, direkte oder umgekehrte Drehung, Bewässerungsmodus (Spray / Wasser / Luft), Art des Gegenwinkels und zwei Arten von Drehzahlen: von 200 bis 40.000 U/min und von 100 bis 4.000 U/min.

Liste der möglichen Optionen und Upgrades

- Standard
- Upgrade (nur 1 Option kann ausgewählt werden)

O Optional (nur 1 Option kann ausgewählt werden)

0

0

0

0

0

• Optional (ohne jede Einschränkung)

Wasserversorgung

Arztinstrumentenablage

OHNE ABLAGE

ZUSATZABLAGE


DOPPELTE ZUSATZABLAGE 410 x 310 mm

ZUSATZABLAGE (NORMAL & DOPPELT)

GEWINKELTE INOX MINILIGHT 6F SPRITZE [1.8M]	•
POSITION OHNE INSTRUMENT	•
TURBINENSCHLAUCH MIT LED	•
LICHTFREIER MCX BIEN LUFTEINLASS-MIKROMOTOR	•
MCX BIEN LUFTEINLASS-MIKROMOTOR MIT LED	•
2 x MCX BIEN LUFTEINLASS MIKROMOTOR MIT LED	•
DMX2 PRO BIEN AIR ENDO MIKROMOTOR MIT LED	•
2 x DMX2 PRO BIEN AIR ENDO MICROMOTOREN MIT LED	•
LICHTFREIER EMS-ULTRASCHALL	•
SCHMERZFREIER GEFÜHRTER EMS-ULTRASCHALL	•
ABLAGEN	

Instrumentenablafe für Krankenschwestern

POSITION GELENKIGER UND HÖHENVERSTELLBARER KANÜLENHALTEARM, BEFESTIGUNG AM KOPFTEIL	•	LEITUNGSWASSEREINTRITT EIGENWASSERSYSTEM MIT VENTILAUSWAHL
INSTRUMENTE		Saug
SAUGKANÜLE 16 mm	•	VENTILE
SAUGKANÜLE 11 mm	•	SELEKTIVES SAUGSCHLAUCHSYSTEM (D1)
GEWINKELTE SPITZE INOX LUZZANI 6F SPRITZE (Assistentenunterstützung)	0	DÜRR SPEIFONTÄNE VENTILKIT
GEWINKELTE SPITZE INOX LUZZANI 6F SPRITZE (Assistentenunterstützung)	0	ABSCHEIDE-/RÜCKGEWINNUNGSSYSTEM
SATELEC MINILED STANDARD LICHTHÄRTUNGSKIT (in Hilfskanülenhalterung)	•	DÜRR CS-1 KIT (mit Auswahlventil + Spüleinheit und Belüftung)
ABLAGEN		DÜRR CAS-1 KIT (mit Auswahlventil + Spüleinheit und Belüftung)
KANÜLEN-OBERSTE ABLAGE -SET	•	METASYS TYP 1 KIT (MST1) (98,6%)

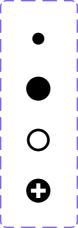

Stuhl		Hilfselemente		Hygiene und Desinfektion	
KOPFSTÜTZE		LAMPEN		HYGIENE-SYSTEM	
KLAPPBARE KOPFSTÜTZE [ANCAR-3000]	•	G-COMM POLARIS LED LAMPENKIT	0	AUTORINSE-SYSTEM: INSTR. AUTOMATISCHES	_
KOPFSTÜTZE MIT KUGELFÖRMIGER BEWEGUNG UND HANDBREMSE - (AUFPREIS)		G-COMM POLARIS DECKENLEUCHTE LED KIT + TRANSFORMATOR	0	SYSTEM ZUR KONTINUIERLICHEN REINIGUNG VON SCHLÄUCHEN	0
KOPFSTÜTZE MIT KUGELFÖRMIGER BEWEGUNG UND PNEUMATISCHER BREMSE - (AUFPREIS)		FARO MAIA LED LAMPENKIT	0	DESINFEKTIONSSYSTEM	
		FARO MAIA DECKENLEUCHTE LED KIT + TRANSFORMATOR	0	WEK WASSERDESINFEKTIONSSYSTEM	0
RÜCKENLEHNE 		FARO ALYA LED LAMPENKIT	0		
ANCAR-3000 BREITE RÜCKENLEHNE	•	FARO ALYA DECKENLEUCHTE LED KIT +	0	Ausführung	
PEDAL		TRANSFORMATOR	O	POLSTERUNG AUS MEMORY-SCHAUMSTOFF "SOFT PLUS"	•
KABELLOSES ELEKTRONISCHES PEDAL	FARO ALYA THEIA TECH LED-LAMPENKIT ●	FARO ALYA THEIA TECH LED-LAMPENKIT	0	WEISSE WASSERKASTENABDECKUNGEN	•
		BILDSCHIRME		FARBIGE WASSERKASTENABDECKUNGEN	
ZUBEHÖR (LINKE ARMSTÜTZE)		2 GELENKARME (FARO)	0	TD-600 STUHL	0
LINKE ARMSTÜTZE	•	NEOVO 24VDC 22" DR-22 LCD-BILDSCHIRM	•	TD-700 STUHL	0
		THEORGE BILLION BILLION III IIVI		TD-800 STUHL	0
ZUBEHÖR (RECHTE ARMSTÜTZE)		HEIZGERÄT		TD GOOGLOTTE	• •
DELUXE-ARMSTÜTZE RECHTS	•	WASSERTASSEN-HEIZKIT	0		
Wassereinheit		KIT WASSERTASSENHEIZUNG + KIT INSTRUMENTENHEIZUNG	0		
STANDARD-WASSERKASTEN	•	ANDERE			
		SCHNELLANSCHLUSS-KIT: USB-ANSCHLUSS + LUFT/WASSER + 230V-AUSGANG	•		
		METALLFUSS FÜR STUHL UND WASSEREINHEIT (NUR SKANDINAVISCHES	•		

MODELL)

SITZKISSEN FÜR ZAHNÄRZTLICHE GERÄTE

0



(+34) 93 754 07 97

Volta dels Garrofers, 41-42.Pol. Ind. Els Garrofers. 08340 Vilassar de Mar. BCN

