

S<sup>3H</sup>

# Produkt Spezifikation

✚ STANDARD-ELEVATIONSTYP

✚ HÄNGESCHLÄUCHE INSTRUMENTENABLAGE

✚ STANDARD-PATIENTENSESSEL

[ANCAR-S.COM](http://ANCAR-S.COM)



**Eine moderne, schlanke und ergonomische Behandlungseinheit, komplett aus Aluminium gefertigt, die Ihnen die tägliche Arbeit erleichtert und jahrzehntelang hält.**



**S<sup>3H</sup>**

## S3

## H

---

### Ergonomie und Komfort

Möglichkeit, die Speifontäne auf der linken Seite des Stuhls für Linkshänder anzubringen (bei Bestellung angeben)

Möglichkeit, den Arm der Absaugschläuche an der Rückseite des Sessels zu befestigen, um ihn beidhändig zu machen (bei der Bestellung angeben)

Inklusive kabellosem Fußpedal

Die Speifontäne kann um 70° gedreht werden, um den Zugang zum Patienten von beiden Seiten zu erleichtern

Höhenverstellbarer Assistenzarm mit kapazitiver Tastatur

In der Position verstellbare, abnehmbare und sterilisierbare Instrumentenhalter

Selbstkompensierender Arm für die Instrumentenablage mit Gaskolben und ohne zusätzliche Bremse, der es Ihnen ermöglicht, die Hauptinstrumentenablage zu positionieren und automatisch zu verriegeln, ohne dass Sie etwas tun oder eine Taste drücken müssen.

Sehr leichtgängige Bewegung des Instrumentenarms

Ergonomische Griffe an der Instrumentenablage für eine bessere Handhabung

---

### Hygiene

Speifontäne und Becken, Wasserhahn und Becherhalter sind abnehmbar und können sterilisiert werden

Standard-Saugschläuche abnehmbar und thermodesinfiziert.

Konzipiert für einfache Reinigung und Desinfektion

Silikonmatte auf der Instrumentenablage ist abnehmbar und sterilisierbar

---

### Technologie

Stuhlbewegungen über Steuerpedal und Tastatur möglich ( Haupt- und Assistent)

Helligkeitsregelung der Lampe am Bildschirm

# Touch expert PRO™



7-Zoll-Multitouch-Farbbildschirm, basierend auf Android, orientierbar, mit IPS-Technologie und einfach zu bedienen.

Unbegrenzte Anzahl von Benutzerprofilen mit eigenen Einstellungen

Anzeige von Klinik, Datum und Uhrzeit sowie die Möglichkeit, das Logo der Klinik auf jedem Bildschirm darzustellen

Hochladen von Röntgenbildern und Fotos, Visualisierung von Bildern, Videos und Bedienungsanleitungen des Geräts

Programmierung der Scaler-Arbeitsparameter in ENDO, PERIO, SCALER sowie des Arbeitsbereichs und der Lichtintensität der Instrumente Einstellung der Betriebsparameter des Mikromotors (mit ENDO-Funktionen): Steuerung des Drehmoments in Ncm, direkte oder umgekehrte Drehung, Bewässerungsmodus (Spray, Drehmomentsteuerung in Ncm, direkte oder umgekehrte Drehung, Bewässerungsmodus (Spray / Wasser / Luft), Art des Gegenwinkels und zwei Arten von Drehzahlen: von 200 bis 40.000 U/min und von 100 bis 4.000 U/min.

# Liste der möglichen Optionen und Upgrades

- Standard
- Upgrade (nur 1 Option kann ausgewählt werden)

- Optional (nur 1 Option kann ausgewählt werden)
- ⊕ Optional (ohne jede Einschränkung)

## Arztinstrumentenablage




- GEWINKELTE INOX MINILIGHT 6F SPRITZE [1.8M] ●
- POSITION OHNE INSTRUMENT ⊕
- TURBINENSCHLAUCH MIT LED ⊕
- LICHTFREIER MCX BIEN LUFTEINLASS-MIKROMOTOR ⊕
- MCX BIEN LUFTEINLASS-MIKROMOTOR MIT LED ⊕
- 2 x MCX BIEN LUFTEINLASS MIKROMOTOR MIT LED ⊕
- DMX2 PRO BIEN AIR ENDO MIKROMOTOR MIT LED ⊕
- 2 x DMX2 PRO BIEN AIR ENDO MICROMOTOREN MIT LED ⊕
- LICHTFREIER EMS-ULTRASCHALL ⊕
- SCHMERZFREIER GEFÜHRTER EMS-ULTRASCHALL ⊕
- ABLAGEN**
- OHNE ABLAGE ●
- ZUSATZABLAGE ●
- DOPPELTE ZUSATZABLAGE 410 x 310 mm ●
- ZUSATZABLAGEN (NORMAL & DOPPELT) ●

## Instrumentenablage für Krankenschwestern

- POSITION**
- GELENKTER KANÜLEN-STÜTZARM, BEFESTIGUNG AM STUHL ●
- GELENKTER UND HÖHENVERSTELLBARER KANÜLEN-STÜTZARM, BEFESTIGUNG AM STUHL ●
- INSTRUMENTE**
- SAUGKANÜLE 16 mm ●
- SAUGKANÜLE 11 mm ●
- GEWINKELTE SPITZE INOX LUZZANI 6F SPRITZE (Assistentenunterstützung) ○
- GEWINKELTE SPITZE INOX LUZZANI 6F SPRITZE (Assistentenunterstützung) ○
- SATELEC MINILED STANDARD ⊕
- LICHTHÄRTUNGSKIT (in Hilfskanülenhalterung) ⊕
- ABLAGEN**
- KANÜLEN-OBERSTE ABLAGE-SET ⊕

## Wasserversorgung

- LEITUNGSWASSEREINTRITT ●
- EIGENWASSERSYSTEM MIT VENTILAUSWAHL ○
- Saug**
- VENTILE**
- SELEKTIVES SAUGSCHLAUCHSYSTEM (D1) ●
- DÜRR SPEIFONTÄNE VENTILKIT ⊕
- ABSCHIED-/RÜCKGEWINNUNGSSYSTEM**
- DÜRR CS-1 KIT (mit Auswahlventil + Spüleinheit und Belüftung) ○
- DÜRR CAS-1 KIT (mit Auswahlventil + Spüleinheit und Belüftung) ○
- METASYS TYP 1 KIT (MST1) (98,6%) ○

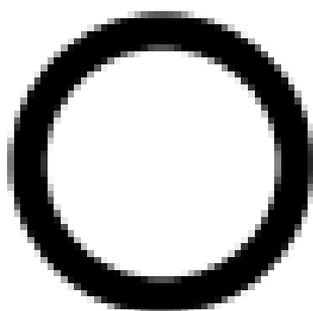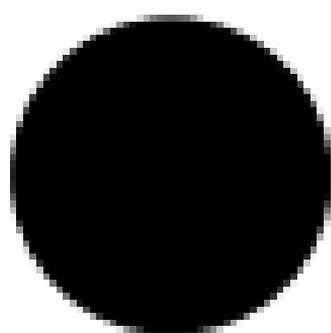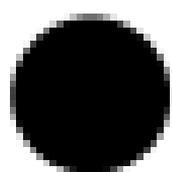

## Stuhl

### KOPFSTÜTZE

KLAPPBARE KOPFSTÜTZE [ANCAR-3000] ●

KOPFSTÜTZE MIT KUGELFÖRMIGER BEWEGUNG UND HANDBREMSE - (AUFPREIS) ●

KOPFSTÜTZE MIT KUGELFÖRMIGER BEWEGUNG UND PNEUMATISCHER BREMSE - (AUFPREIS) ●

### RÜCKENLEHNE

ANCAR-3000 BREITE RÜCKENLEHNE ●

### PEDAL

KABELLOSES ELEKTRONISCHES PEDAL ●

### ZUBEHÖR (LINKE ARMSTÜTZE)

LINKE ARMSTÜTZE ●

DELUXE-ARMSTÜTZE LINKS ●

### ZUBEHÖR (RECHTE ARMSTÜTZE)

ARMSTÜTZE RECHTS ○

DELUXE-ARMSTÜTZE RECHTS ○

## Wassereinheit

STANDARD-WASSERKASTEN ●

## Hilfselemente

### LAMPEN

G-COMM POLARIS LED LAMPENKIT ○

G-COMM POLARIS DECKENLEUCHE LED KIT + TRANSFORMATOR ○

FARO MAIA LED LAMPENKIT ○

FARO MAIA DECKENLEUCHE LED KIT + TRANSFORMATOR ○

FARO ALYA LED LAMPENKIT ○

FARO ALYA DECKENLEUCHE LED KIT + TRANSFORMATOR ○

FARO ALYA THEIA TECH LED-LAMPENKIT ○

### BILDSCHIRME

2 GELENKARME (FARO) ○

NEOVO 24VDC 22" DR-22 LCD-BILDSCHIRM ⊕

### HEIZGERÄT

WASSERTASSEN-HEIZKIT ○

KIT WASSERTASSENHEIZUNG + KIT INSTRUMENTENHEIZUNG ○

### ANDERE

SCHNELLANSCHLUSS-KIT: USB-ANSCHLUSS + LUFT/WASSER + 230V-AUSGANG ●

METALLFUSS FÜR STUHL UND WASSEREINHEIT (NUR SKANDINAVISCHES MODELL) ⊕

SITZKISSEN FÜR ZAHNÄRZTLICHE GERÄTE ⊕

## Hygiene und Desinfektion

### HYGIENE-SYSTEM

AUTORINSE-SYSTEM: INSTR. AUTOMATISCHES SYSTEM ZUR KONTINUIERLICHEN REINIGUNG VON SCHLÄUCHEN ○

### DESINFEKTIONSSYSTEM

WEK WASSERDESINFEKTIONSSYSTEM (AUSSER SD-60) ○

## Ausführung

STANDARD-POLSTERUNG ●

"POLSTERUNG AUS MEMORY-SCHAUMSTOFF "SOFT PLUS ●

WEISSE WASSERKASTENABDECKUNGEN ●

FARBIGE WASSERKASTENABDECKUNGEN ●

TD-600 STUHL ⊕

TD-700 STUHL ⊕

TD-800 STUHL ⊕

[ancar@ancar-online.com](mailto:ancar@ancar-online.com)

(+34) 93 754 07 97

Volta dels Garrofers, 41-42.Pol. Ind. Els  
Garrofers. 08340 Vilassar de Mar. BCN



by Ancar