

S^{5W}

Produkt Spezifikation

✚ VERTIKALER AUFZUGSTYP

✚ WHIP SYSTEM INSTRUMENTENABLAGE

✚ STANDARD-PATIENTENSESSEL

ANCAR-S.COM



Eine moderne, schlanke und ergonomische Behandlungseinheit, komplett aus Aluminium gefertigt, die Ihnen die tägliche Arbeit erleichtert und jahrzehntelang hält.



S 5W

S5

W

Ergonomie und Komfort

Zahnärztlicher Stuhl, der an der Hydrikbox befestigt ist, mit seitlicher Bewegung und ohne Unterbau. Dies bietet bessere und mehr Arbeitsmöglichkeiten und verleiht der Zahnarztpraxis ein anspruchsvolles Aussehen.

Drehbare Speischale aus Porzellan

Inklusive kabellosem Fußpedal

Die Speifontäne kann um 70° gedreht werden, um den Zugang zum Patienten von beiden Seiten zu erleichtern

Wählen Sie zwischen zwei Geschwindigkeiten des Patientenstuhls

Höhenverstellbarer Assistenzarm mit kapazitiver Tastatur

3D-Bewegung der Instrumentenschläuche

Lange, nicht ziehende Instrumentenschläuche (selbstkompensierend)

Selbstkompensierender Arm für die Instrumentenablage mit Gaskolben und ohne zusätzliche Bremse, der es Ihnen ermöglicht, die Hauptinstrumentenablage zu positionieren und automatisch zu verriegeln, ohne dass Sie etwas tun oder eine Taste drücken müssen.

Sehr leichtgängige Bewegung des Instrumentenarms

Ergonomische Griffe an der Instrumentenablage für eine bessere Handhabung

Hygiene

Speifontäne und Becken, Wasserhahn und Becherhalter sind abnehmbar und können sterilisiert werden

Standard-Saugschläuche abnehmbar und thermodesinfiziert.

Konzipiert für einfache Reinigung und Desinfektion

Silikonmatte auf der Instrumentenablage ist abnehmbar und sterilisierbar

Technologie

Stuhlbewegungen über Steuerpedal und Tastatur möglich (Haupt- und Assistent)

Helligkeitsregelung der Lampe am Bildschirm

Touch expert PRO™



7-Zoll-Multitouch-Farbbildschirm, basierend auf Android, orientierbar, mit IPS-Technologie und einfach zu bedienen.

Unbegrenzte Anzahl von Benutzerprofilen mit eigenen Einstellungen

Anzeige von Klinik, Datum und Uhrzeit sowie die Möglichkeit, das Logo der Klinik auf jedem Bildschirm darzustellen

Hochladen von Röntgenbildern und Fotos, Visualisierung von Bildern, Videos und Bedienungsanleitungen des Geräts

Programmierung der Scaler-Arbeitsparameter in ENDO, PERIO, SCALER sowie des Arbeitsbereichs und der Lichtintensität der Instrumente Einstellung der Betriebsparameter des Mikromotors (mit ENDO-Funktionen): Steuerung des Drehmoments in Ncm, Vor- oder Rückwärtslauf, Irrigationsmodus (Sprühen, Steuerung des Drehmoments in Ncm, Vor- oder Rückwärtslauf, Irrigationsmodus (Sprühen / Wasser / Luft), Art des Gegenwinkels und zwei Drehzahlbereiche: 200 bis 40.000 U/min und 100 bis 4.000 U/min.

Liste der möglichen Optionen und Upgrades

- Standard
- Upgrade (nur 1 Option kann ausgewählt werden)

- Optional (nur 1 Option kann ausgewählt werden)
- ⊕ Optional (ohne jede Einschränkung)

Arztinstrumentenablage

GEWINKELTE INOX MINILIGHT 6F SPRITZE [1.8M]	●
POSITION OHNE INSTRUMENT	⊕
TURBINENSCHLAUCH MIT LED	⊕
LICHTFREIER MCX BIEN LUFTEINLASS-MIKROMOTOR	⊕
MCX BIEN LUFTEINLASS-MIKROMOTOR MIT LED	⊕
2 x MCX BIEN LUFTEINLASS MIKROMOTOR MIT LED	⊕
DMX2 PRO BIEN AIR ENDO MIKROMOTOR MIT LED	⊕
2 x DMX2 PRO BIEN AIR ENDO MIKROMOTOREN MIT LED	⊕
LICHTFREIER EMS-ULTRASCHALL	⊕
SCHMERZFREIER GEFÜHRTER EMS-ULTRASCHALL	⊕
ABLAGEN	
OHNE ABLAGE	●
ZUSATZABLAGE	●
DOPPELTE ZUSATZABLAGE 410 x 310 mm	●

Instrumentenablage für Krankenschwestern




POSITION	
GELENKIGER UND HÖHENVERSTELLBARER KANÜLENHALTEARM, BEFESTIGUNG AM KOPFTEIL	●
INSTRUMENTE	
SAUGKANÜLE 16 mm	●
SAUGKANÜLE 11 mm	●
GEWINKELTE SPITZE INOX LUZZANI 6F SPRITZE (Assistentenunterstützung)	○
GEWINKELTE SPITZE INOX LUZZANI 6F SPRITZE (Assistentenunterstützung)	○
SATELEC MINILED STANDARD	⊕
LICHTHÄRTUNGSKIT (in Hilfskanülenhalterung)	⊕
ABLAGEN	
KANÜLEN-OBERSTE ABLAGE -SET	⊕

Wasserversorgung

LEITUNGSWASSEREINTRITT	●
EIGENWASSERSYSTEM MIT VENTILAUSWAHL	○

Saug

VENTILE	
SELEKTIVES SAUGSCHLAUCHSYSTEM (D1)	●
DÜRR SPEIFONTÄNE VENTILKIT	⊕
ABSCHIED-/RÜCKGEWINNUNGSSYSTEM	
DÜRR CS-1 KIT (mit Auswahlventil + Spüleinheit und Belüftung)	○
DÜRR CAS-1 KIT (mit Auswahlventil + Spüleinheit und Belüftung)	○
METASYS TYP 1 KIT (MST1) (98,6%)	○

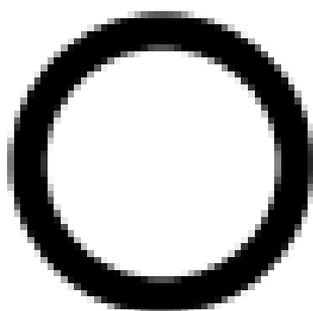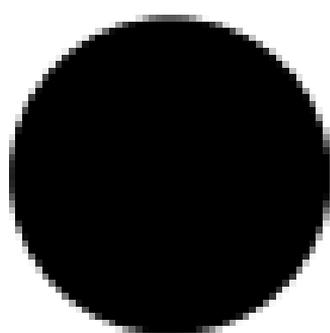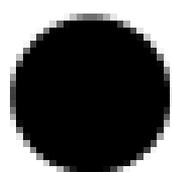

Stuhl

KOPFSTÜTZE

KLAPPBARE KOPFSTÜTZE [ANCAR-3000] ●

KOPFSTÜTZE MIT KUGELFÖRMIGER BEWEGUNG UND HANDBREMSE - (AUFPREIS) ●

KOPFSTÜTZE MIT KUGELFÖRMIGER BEWEGUNG UND PNEUMATISCHER BREMSE - (AUFPREIS) ●

RÜCKENLEHNE

ANCAR-3000 BREITE RÜCKENLEHNE ●

PEDAL

KABELLOSES ELEKTRONISCHES PEDAL ●

ZUBEHÖR (LINKE ARMSTÜTZE)

DELUXE-ARMSTÜTZE LINKS ●

ZUBEHÖR (RECHTE ARMSTÜTZE)

DELUXE-ARMSTÜTZE RECHTS ⊕

Wassereinheit

STANDARD-WASSERKASTEN ●

Hilfselemente

LAMPEN

G-COMM POLARIS LED LAMPENKIT ○

G-COMM POLARIS DECKENLEUCHTE LED KIT + TRANSFORMATOR ○

FARO MAIA LED LAMPE KIT ○

FARO MAIA DECKENLEUCHTE LED KIT + TRANSFORMATOR ○

FARO ALYA LED LAMPE KIT ○

FARO ALYA DECKENLEUCHTE LED KIT + TRANSFORMATOR ○

FARO ALYA THEIA TECH LED-LAMPENKIT ○

BILDSCHIRME

2 GELENKARME (FARO) ○

NEOVO 24VDC 22" DR-22 LCD-BILDSCHIRM ⊕

HEIZGERÄT

WASSERTASSEN-HEIZKIT ○

KIT WASSERTASSENHEIZUNG + KIT INSTRUMENTENHEIZUNG ○

ANDERE

SCHNELLANSCHLUSS-KIT: USB-ANSCHLUSS + LUFT/WASSER + 230V-AUSGANG ●

METALLBODEN ZUR STABILISIERUNG DER WASSEREINHEIT ⊕

SITZKISSEN FÜR ZAHNÄRZTLICHE GERÄTE ⊕

Hygiene und Desinfektion

HYGIENE-SYSTEM

AUTORINSE-SYSTEM: INSTR. AUTOMATISCHES SYSTEM ZUR KONTINUIERLICHEN REINIGUNG VON SCHLÄUCHEN ○

DESINFEKTIONSSYSTEM

WEK WASSERDESINFEKTIONSSYSTEM (AUSSER SD-60) ○

Ausführung

STANDARD-POLSTERUNG ●

POLSTERUNG AUS MEMORY-SCHAUMSTOFF "SOFT PLUS" ●

WEISSE WASSERKASTENABDECKUNGEN ●

FARBIGE WASSERKASTENABDECKUNGEN ●

TD-600 STUHL ⊕

TD-700 STUHL ⊕

TD-800 STUHL ⊕

ancar@ancar-online.com

(+34) 93 754 07 97

Volta dels Garrofers, 41-42.Pol. Ind. Els
Garrofers. 08340 Vilassar de Mar. BCN



by Ancar