

Höchste Qualität und meisterhafte Fertigung

Gemacht, um zu bleiben.
Eine Investition für die Zukunft



ancar

ancar-s.com
ancar-online.com



Ancar :

Mehr als 60 Jahre Exzellenz in der Dentalbranche

Gegründet im Jahr 1958 in Vilassar de Mar, nahe Barcelona, entstand Ancar in einem malerischen Fischerdorf. Inspiriert von seiner Umgebung hat sich unser Familienunternehmen zu einer Referenz in der Herstellung hochwertiger Aluminium-Zahnarztstühle entwickelt.

EINE GESCHICHTE DES FAMILIENERFOLGS

Die Geschichte von Ancar begann mit Antoni Carles Pujol, einem Visionär im Aluminiumdesign, zunächst in der Automobilindustrie bei Motor Ibérica (Nissan). Sein Unternehmergeist führte ihn später dazu, die Zahnmedizin- und Augenoptik-Branchen zu erkunden. Seitdem hat Ancar kontinuierlich innoviert und sich zu einer globalen Referenz für Materialqualität entwickelt.

EIN ERBE, DAS BLEIBT

Heute führt Antoni Carles Bosch, der Sohn des Gründers, dieses Erbe mit Leidenschaft fort. Ancar bleibt ein familiengeführtes Unternehmen, das von den Werten Tradition, Integrität und Exzellenz geprägt ist. Wir legen großen Wert auf langfristige Beziehungen zu unseren Kunden, die auf Vertrauen und aufmerksamem Zuhören basieren.

ZUVERLÄSSIGKEIT IM DIENST DER EXZELLENZ

Unsere drei Säulen sind Tradition, Innovation und Zuverlässigkeit. Auf der Grundlage unserer Expertise und dem Einsatz von Aluminium schaffen wir robuste und moderne Zahnarzteinheiten. Unsere Stühle sind auf Langlebigkeit ausgelegt, mit minimalem Wartungsaufwand. Innovation steht im Zentrum unseres Prozesses, der es uns ermöglicht, leistungsstarke, zuverlässige Produkte an der Spitze der Technologie anzubieten.

TRADITION UND INNOVATION IM HERZEN UNSERER DNA

Vilassar de Mar und Barcelona, mit ihren künstlerischen und architektonischen Einflüssen, haben unsere Herangehensweise geprägt. Ancar verbindet Ästhetik und Funktionalität und lässt sich dabei von den Werken Gaudís und der mediterranen Schönheit inspirieren. Seit jeher setzen wir auf Aluminium, um langlebige, leichte und korrosionsbeständige Produkte zu schaffen. Jeder Stuhl wird so entworfen, dass er Komfort und Langlebigkeit bietet.

EIN ENGAGEMENT FÜR UNSERE WURZELN UND UNSERE PARTNER

Ancar bleibt in der katalanischen Kultur verwurzelt und arbeitet mit lokalen Zulieferern zusammen, um die regionale Wirtschaft zu unterstützen. Wir pflegen starke und transparente Beziehungen zu unseren Partnern und Händlern, die auf einem menschlichen Ansatz und ständiger Kommunikation basieren.

DAS ANCAR ENGAGEMENT

Mit über 60 Jahren Erfahrung vereint Ancar Tradition und Innovation, um zuverlässige und leistungsstarke Produkte zu liefern. Wenn Sie sich für Ancar entscheiden, wählen Sie einen vertrauenswürdigen Partner, der sich der Neudefinition von Exzellenz im Dentalbereich verschrieben hat.



Ortho

Aluminium Core



Sd-60



Ancar-3200

Sd-60

Zahntechnik mit Stil

Das SD-60 Gerät ist die grundlegendste und gleichzeitig die genialste Ausstattung für Ihre Praxis. Es ist insbesondere für kieferorthopädische Eingriffe geeignet. Eine erschwingliche Investition, die ein zahntechnisches Gerät mit besten Leistungen, bester Materialqualität, Sicherheit, Präzision, Funktionalität, Ergonomie und Hygiene bietet.



EINIGE EIGENSCHAFTEN DER Sd-60

- Assistenzarm mit zwei Standard-Saugschläuchen (klein und groß), mit der Möglichkeit, weitere Instrumente hinzuzufügen.
- Multifunktionspedal. Elektrische Mikromotorsteuerung über Potentiometer.
- Abnehmbare und autoklavierbare Speischale aus Porzellan.
- Abnehmbarer, einfach zu reinigender Becherfüller.
- Intuitives und ergonomisches „Easy Touch« Bedienfeld.
- Wassereinheit aus korrosionsbeständigem Aluminium und 70° Drehachse.
- Leichter Zugang durch Türsystem mit Tip-On-Mechanismus.
- Erweiterbar mit 2 weiteren Instrumenten.
- «Trendelenburg» Position.
- 5 Positionsspeicher.

Vielseitigkeit

Ancar-3200



Das kieferorthopädische Gerät Ancar 3200 erfüllt alle Ihre Anforderungen. Das ergonomische Design ermöglicht eine große Bewegungsvervielfalt und sorgt dafür, dass Sie in jeder Position bequem arbeiten können.

Vielseitigkeit und Funktionalität auf höchstem Niveau garantieren das Wohlbefinden der Patienten und die Optimierung der kieferorthopädischen Behandlungen.



EINIGE EIGENSCHAFTEN DER Ancar-3200

- Elektropneumatischer kieferorthopädischer Stuhl aus leichter, korrosionsbeständiger Aluminiumlegierung, mit Trendelenburg-Position und 5 Bewegungsspeichern.
- Beidhändig beweglicher Instrumentenarm, für Rechts- und Linkshänder geeignet.
- 1 Saugschlauch, 3-Funktionsspritze, Schlauch für Turbine, Mikromotor oder Scaler.
- Multifunktionale Gelenkkopfstütze (im Lieferumfang enthalten), oder kugelförmige Kopfstütze mit manueller oder pneumatischer Bremse (optional).
- Minimale Stuhlhöhe 400 mm, maximale Stuhlhöhe 810 mm.

Ancar-3000

*Bequem für Sie,
bequem für Ihre Patienten*



BEHANDLUNGSSTUHL

Bei den Leistungen des A-3000 wurde nicht nur an den Techniker gedacht. Wir wollen damit den Patienten höchsten Komfort während der gesamten Behandlung bieten.

Alle Geräte der Ortho Serie sind dank ihrer beiden Polstervarianten noch bequemer: „Standard“ und „Soft“. Ihre Kopfstütze ist für alle Körpergrößen, d. h. auch für Kindergrößen geeignet, sodass man optimal und bequem damit arbeiten kann. Außerdem können alle Stuhlstellungen vom Pedal aus reguliert werden. Als Option kann die rechte Armlehne hinzugefügt werden. Sie sind mit Sicherheitsvorrichtungen am Boden und an der Rückenlehne ausgestattet, um unvorhersehbare Bewegungen zu vermeiden und bei allen Eingriffen höchste Zuverlässigkeit zu garantieren.

Serie 3

Touch Expert



Sd-300

Sd-300

Touch Expert

Elektronische Behandlungseinheit mit Peitschensystem

Bewährte Zuverlässigkeit. In der modernen Zahnmedizin müssen Patienten und Fachleute wissen, dass sie sich jederzeit in „guten Händen“ befinden.



Optional:
Assistenzarm 3-fach verstellbar.

EINIGE EIGENSCHAFTEN DER Sd-300

- Elektronische Geräte, die auf die Wünsche des Zahnarztes zugeschnitten sind und dank des Touch Expert Touchscreens zur Verkürzung der Interventionszeiten beitragen.
- 70° Bewegung des Wasserblocks zur Erleichterung der zahnärztlichen Behandlung mit vier Händen.
- Multifunktionales Pedal.
- Höhenverstellbares Helferinelement (optional).
- Anschlussbox in der Stuhlbasis integriert.

Elektronische Behandlungseinheit mit hängenden Schläuchen

Sd-350

Touch Expert



Optional:
Assistenzarm 3-fach verstellbar.

EINIGE EIGENSCHAFTEN DER Sd-350 Touch Expert

- Touch Expert Technologie.
- Elektronische Geräte, die auf die Wünsche des Zahnarztes zugeschnitten sind und dank des Touch Expert Touchscreens zur Verkürzung der Interventionszeiten beitragen.
- 70° Bewegung des Wasserblocks zur Erleichterung der zahnärztlichen Behandlung mit vier Händen.
- Multifunktionales Pedal.
- Höhenverstellbares Helferinelement (optional).
- Anschlussbox in der Stuhlbasis integriert.

S

by Ancar

ancar-s.com



Entdecken Sie die neue S-Line

Dentaleinheiten, die Funktionalität und Ästhetik verbinden
und Ihre Praxis auf ein neues Niveau heben





Touch expert PRO™

**Ein Tablet, das Sie durch jede Behandlung führt.
Eine Oberfläche, die so einfach zu bedienen ist wie Ihr eigenes Smartphone.**

Der neue TOUCH EXPERT PRO ist ein auf dem ANDROID-System basierendes Tablet, das Ihnen die tägliche Arbeit erleichtern wird. Es ist unmöglich, alle Funktionen dieses Tablets auf einer Seite aufzulisten, aber hier sind einige seiner vielen Vorteile:

Benutzerfreundlicher, kippbarer 7-Zoll-Multitouch-Farbbildschirm mit IPS-Technologie.

Unbegrenzte Anzahl von Benutzerprofilen mit eigenen Einstellungen.

Praxisname, Datum und Uhrzeit sowie die Möglichkeit, jedem Bildschirm ein Praxislogo hinzuzufügen.

Laden Sie Röntgenbilder und Fotos, betrachten Sie Bilder, Videos und Gerätehandbücher.

Programmierung der Scaler-Arbeitsparameter in ENDO, PERIO, SCALER sowie des Arbeitsbereichs und der Lichtintensität der Instrumente. Einstellung der Betriebsparameter des Mikromotors (mit ENDO-Funktionen): Steuerung des Drehmoments in Ncm, direkte oder umgekehrte Drehung, Bewässerungsmodus (Spray/Wasser/Luft), Art des Gegenwinkels und zwei Arten von Drehzahl: von 200 bis 40.000 U/min und von 100 bis 4000 U/min.

Finden Sie heraus, wie der Touch Expert Pro Ihre tägliche Arbeit erleichtert und fordern Sie eine Vorführung bei Ihrem nächstgelegenen Ancar-Händler an. Finden Sie Ihren Händler unter www.ancar-s.com.

S^{3W}

Standard-Patientenstuhl mit Peitschensystem

Passen Sie Ihr Gerät an und wählen Sie aus verschiedenen Kopfpolstern Tray Ablagen, OP-Leuchten, Hygienesystemen usw.

Leicht anmutender Arm mit einem breiten Spektrum an Bewegungspositionen

Schwingbügelsystem mit 3D-Bewegungsfreiheit der Schwingbügel

Abnehmbares und sterilisierbares Mundspülbecken sowie Becheraufnahme

SOFT Polsterung mit Memory-Schaum

Kapazitive Tastatur des Helferinnenelements

Android-Display Touch-Expert-PRO

70°-Schwenkbereich der Wassereinheit für bessere Zugänglichkeit zum Patienten

Höhenverstellbares Tablet

Kabelloser Fußanlasser



Absaugarm montierbar auf der Rückseite der Patientenliege (Option) für Rechts- Linkshänder Bedienung oder aber Standard an der Wassereinheit adaptiert

S 3W RC

Liegender Patientenstuhl mit 90 Grad klappbarer Fußstütze und Peitschensystem

Passen Sie Ihr Gerät
an und wählen Sie aus
verschiedenen Kopfpolstern
Tray Ablagen, OP-Leuchten,
Hygienesystemen usw.

Abnehmbares und sterilisierbares
Mundspülbecken sowie Becheraufnahme

SOFT Polsterung
mit Memory-Schaum

Kapazitive Tastatur
des Helferinnenelements

Höhenverstellbares
Tablet

Kabelloser Fußanlasser


Leicht anmutender Arm mit einem breiten
Spektrum an Bewegungspositionen

Schwingbügelsystem mit
3D-Bewegungsfreiheit der
Schwingbügel

Android-Display
Touch-Expert-PRO

70°-Schwenkbereich
der Wassereinheit für bessere
Zugänglichkeit zum Patienten

Stuhl mit 90° klappbarer Fußstütze

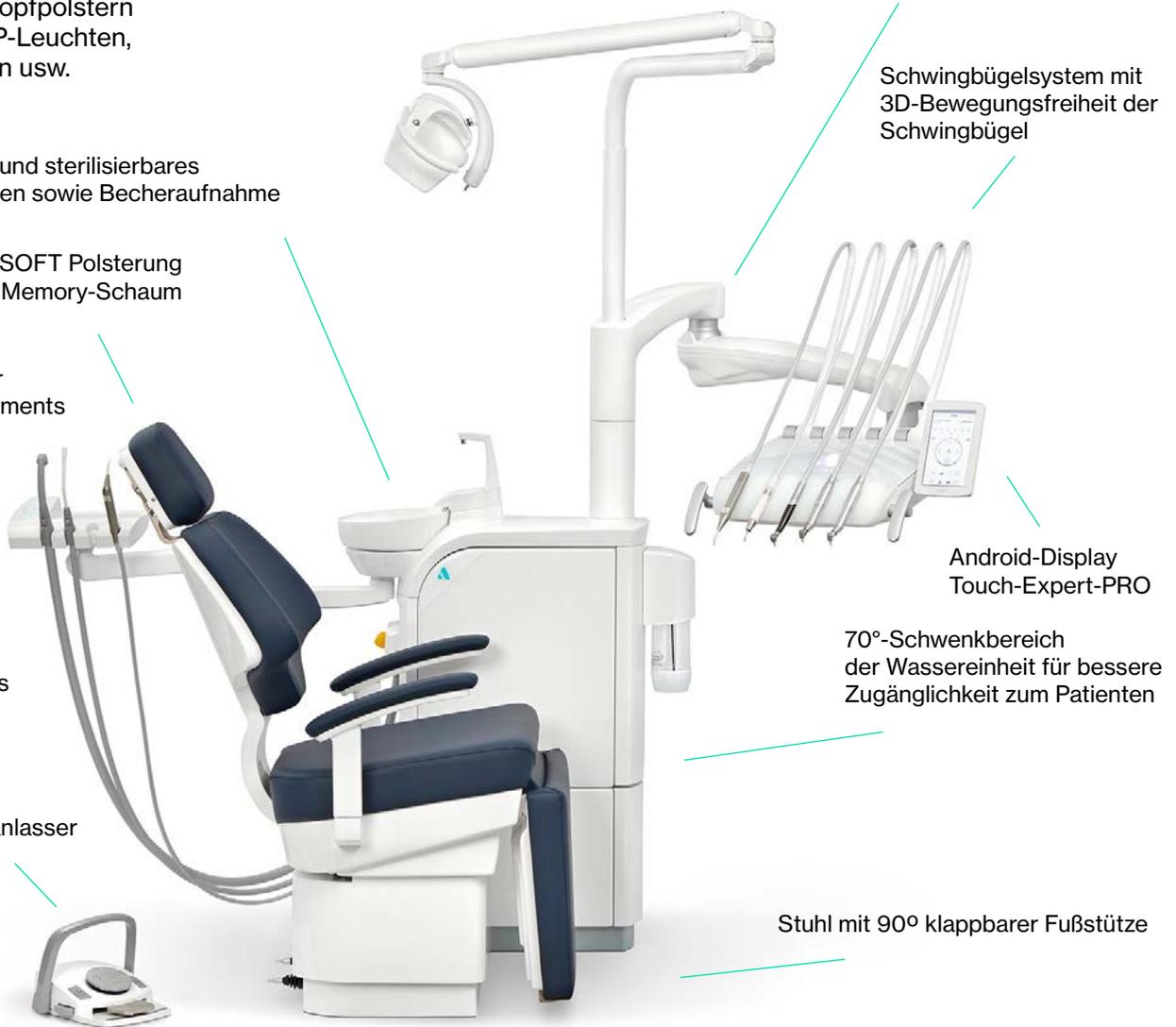

S^{3H}

Standard-Patientenstuhl mit hängenden Instrumentenschläuchen

Passen Sie Ihr Gerät an und wählen Sie aus verschiedenen Kopfpolstern Tray Ablagen, OP-Leuchten, Hygienesystemen usw.

70°-Schwenkbereich der Wassereinheit für bessere Zugänglichkeit zum Patienten

Abnehmbares und sterilisierbares Mundspülbecken sowie Becheraufnahme

Leicht anmutender Arm mit einem breiten Spektrum an Bewegungspositionen

Kapazitive Tastatur des Helferinnenelements

Höhenverstellbares Tablet

Android-Display Touch-Expert-PRO

SOFT Polsterung mit Memory-Schaum

Kabelloser Fußanlasser

Verstellbare, abnehmbare und thermodesinfizierbare Instrumententrays und Silikonauflagen



Absaugarm montierbar auf der Rückseite der Patientenliege (Option) für Rechts- Linkshänder Bedienung oder aber Standard an der Wassereinheit adaptiert

S 3H RC

Liegender Patientenstuhl mit 90 Grad klappbarer Fußstütze und hängenden Instrumentenschläuchen

Passen Sie Ihr Gerät an und wählen Sie aus verschiedenen Kopfpolstern Tray Ablagen, OP-Leuchten, Hygienesystemen usw.

Abnehmbares und sterilisierbares Mundspülbecken sowie Becheraufnahme

SOFT Polsterung mit Memory-Schaum

Kapazitive Tastatur des Helferinnenelements

Höhenverstellbares Tablet

Kabelloser Fußanlasser


70°-Schwenkbereich der Wassereinheit für bessere Zugänglichkeit zum Patienten

Leicht anmutender Arm mit einem breiten Spektrum an Bewegungspositionen

Android-Display Touch-Expert-PRO

Verstellbare, abnehmbare und thermodesinfizierbare Instrumententrays und Silikonauflagen

Stuhl mit 90° klappbarer Fußstütze

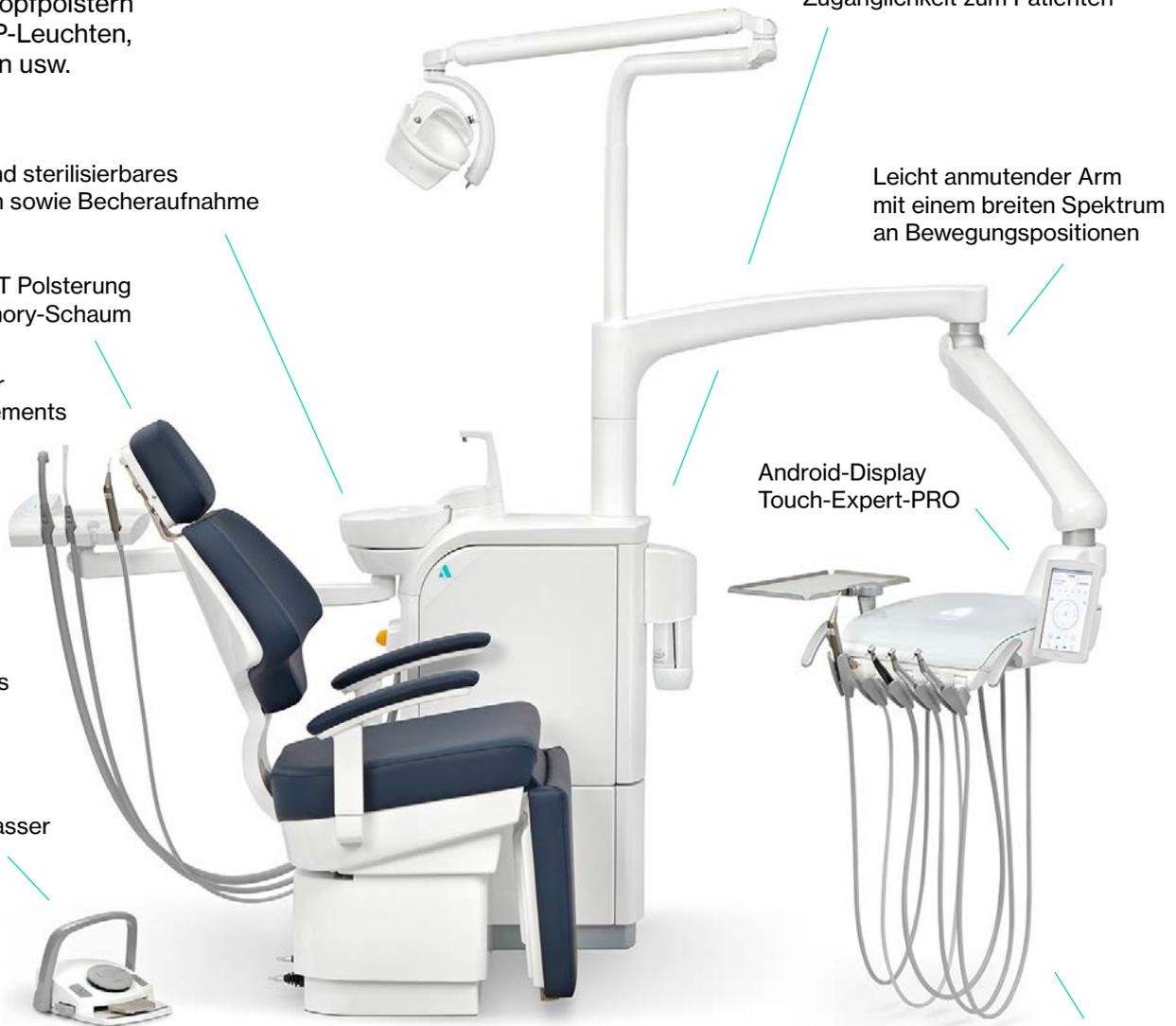

S^{3C}

Standard-Patientenstuhl und Cart

Passen Sie Ihr Gerät an und wählen Sie aus verschiedenen Kopfpolstern Tray Ablagen, OP-Leuchten, Hygienesystemen usw.

70°-Schwenkbereich der Wassereinheit für bessere Zugänglichkeit zum Patienten

Abnehmbares und sterilisierbares Mundspülbecken sowie Becheraufnahme

Kapazitive Tastatur des Helferinnenelements

Leicht höhenverstellbares Cart

Höhenverstellbares Tablet

Android-Display Touch-Expert-PRO

SOFT Polsterung mit Memory-Schaum

Kabelloser Fußanlasser

Verstellbare, abnehmbare und thermodesinfizierbare Instrumententrays und Silikonauflagen




Absaugarm montierbar auf der Rückseite der Patientenliege (Option) für Rechts- Linkshänder Bedienung oder aber Standard an der Wassereinheit adaptiert

S 3C RC

Liegender Patientenstuhl mit 90 Grad klappbarer Fußstütze und Cart

Passen Sie Ihr Gerät an und wählen Sie aus verschiedenen Kopfpolstern Tray Ablagen, OP-Leuchten, Hygienesystemen usw.

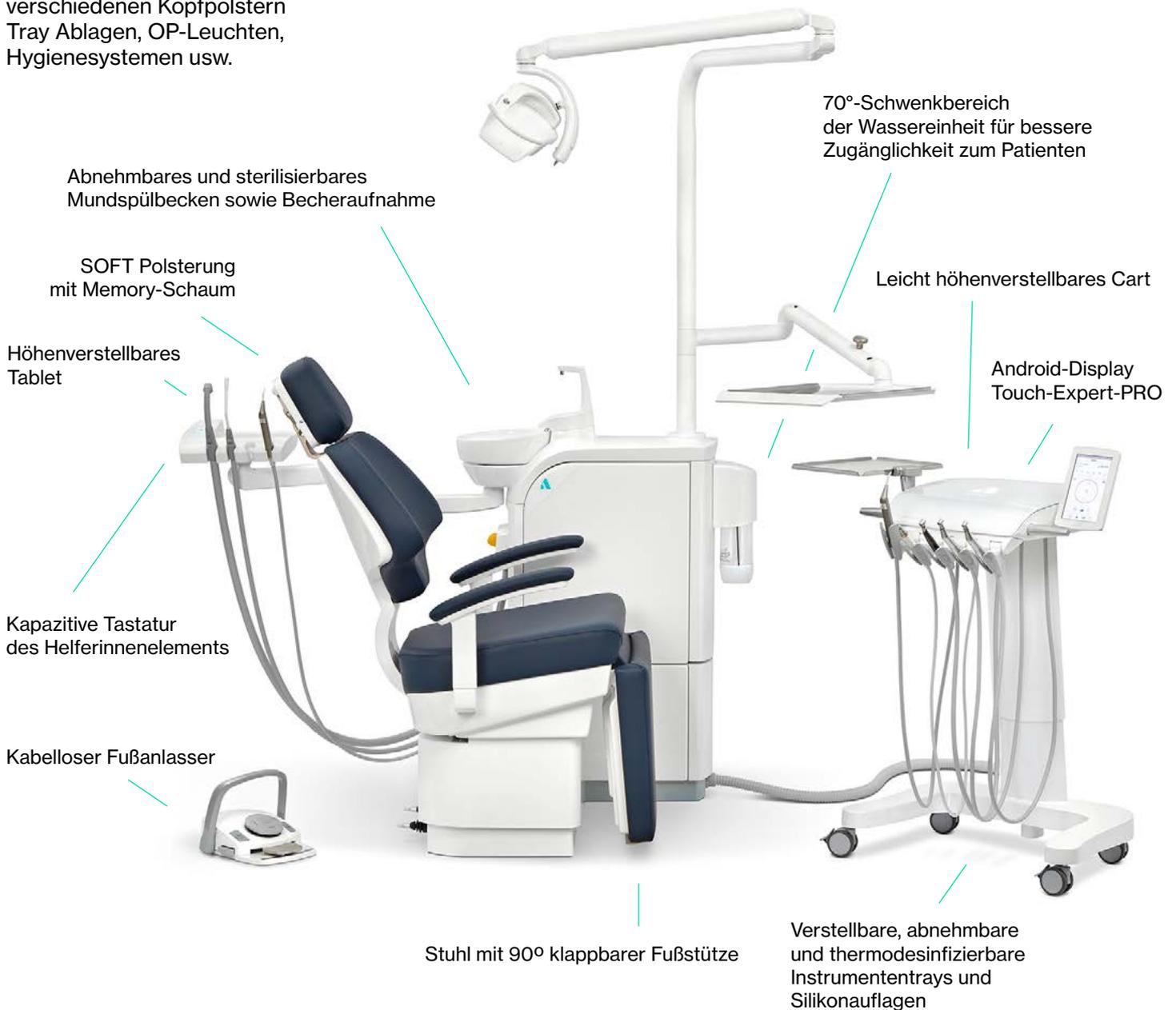

S 5W

Behandlungsplatz mit schwebender Standardpatientenliege und Peitschensystem

(Behandlungsstuhl hängt schwebend an der Wassereinheit)

Passen Sie Ihr Gerät an und wählen Sie aus verschiedenen Kopfpolstern Tray Ablagen, OP-Leuchten, Hygienesystemen usw.

Zum Patienten hin schwenkbares Mundspülbecken

Abnehmbares und sterilisierbares Mundspülbecken sowie Becheraufnahme

Kapazitive Tastatur des Helferinnenelements

Höhenverstellbares Tablet

SOFT Polsterung mit Memory-Schaum


Kabelloser Fußanlasser

Leicht anmutender Arm mit einem breiten Spektrum an Bewegungspositionen

Schwingbügelsystem mit 3D-Bewegungsfreiheit der Schwingbügel

Android-Display Touch-Expert-PRO

Laterale, schwebende Stuhlfunktion für verbesserte Ergonomie während der Arbeit

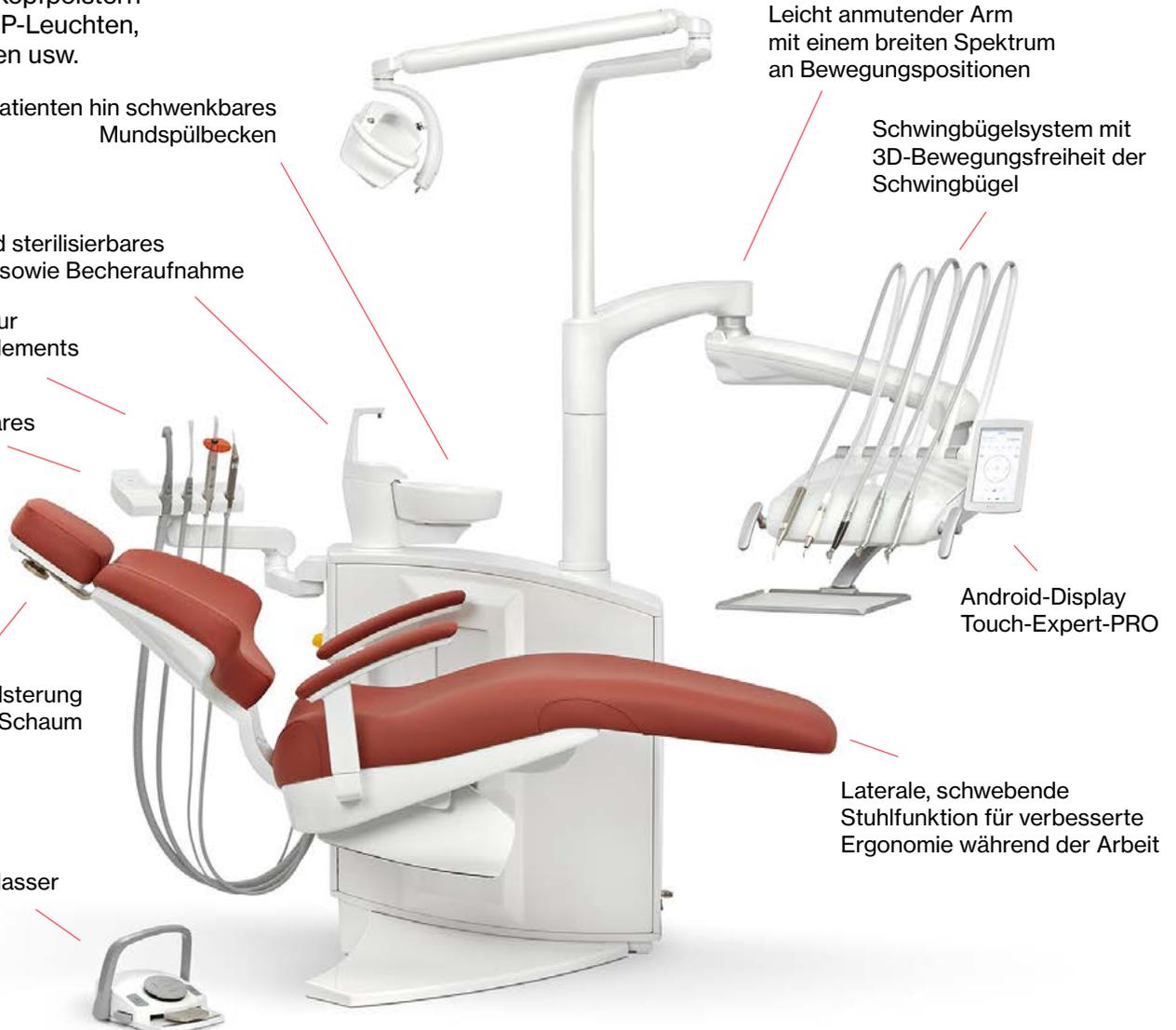

S 5W RC

Behandlungsplatz mit 90 Grad klappbarer Fußstütze an der schwebenden Patientenliege mit Peitschensystem (Behandlungsstuhl hängt schwebend an der Wassereinheit)

Passen Sie Ihr Gerät
an und wählen Sie aus
verschiedenen Kopfpolstern
Tray Ablagen, OP-Leuchten,
Hygienesystemen usw.

Zum Patienten hin schwenkbares
Mundspülbecken

Abnehmbares und sterilisierbares
Mundspülbecken sowie Becheraufnahme

SOFT Polsterung
mit Memory-Schaum

Kapazitive Tastatur
des Helferinnenelements

Höhenverstellbares
Tablet

Kabelloser Fußanlasser


Leicht anmutender Arm
mit einem breiten Spektrum
an Bewegungspositionen

Schwingbügelsystem mit
3D-Bewegungsfreiheit der
Schwingbügel

Android-Display
Touch-Expert-PRO

Laterale, schwebende
Stuhlfunktion für verbesserte
Ergonomie während der Arbeit

Stuhl mit 90° klappbarer Fußstütze

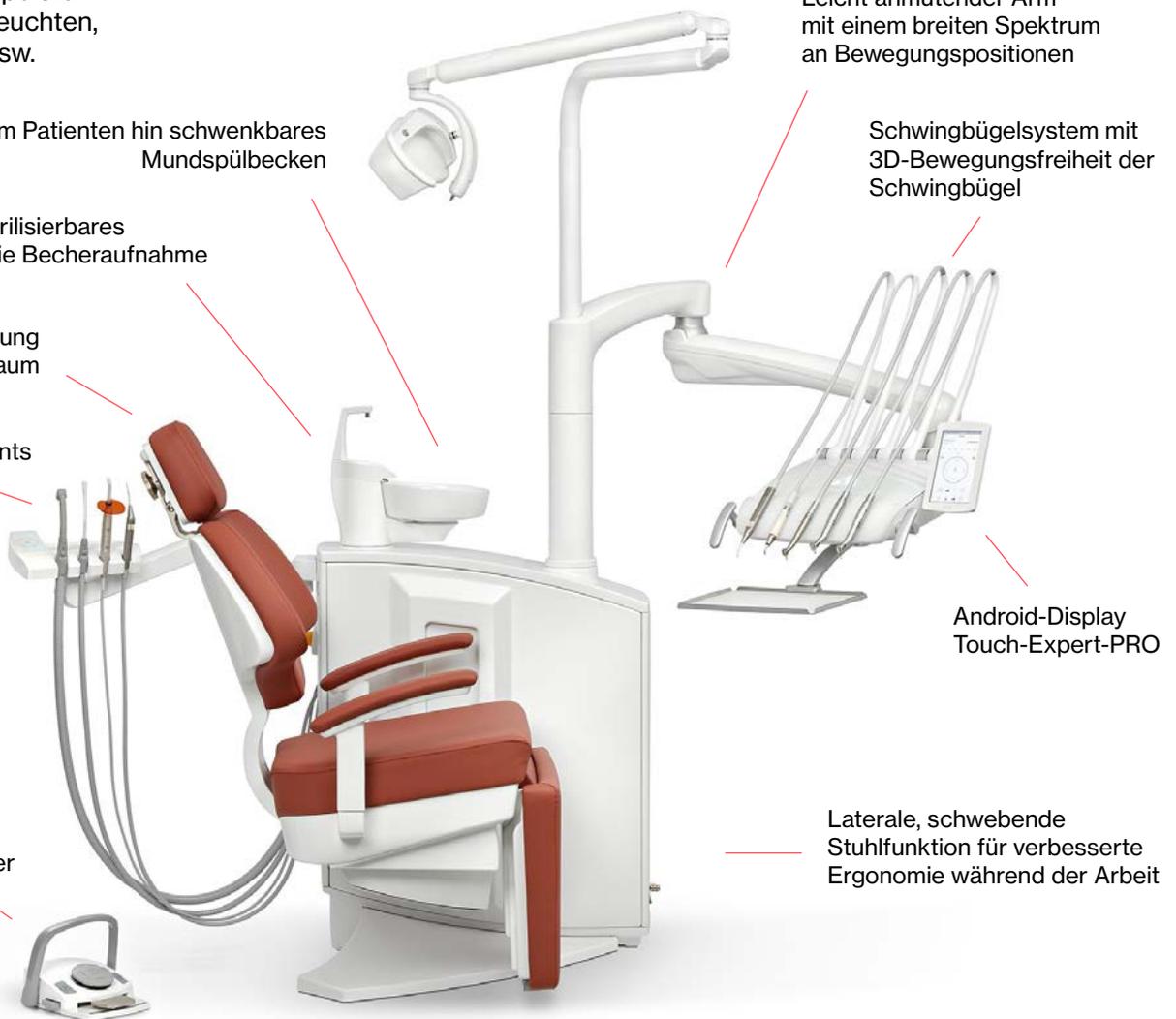

S 5H

Behandlungsplatz mit schwebender Standardpatientenliege und hängenden Instrumentenschläuchen

(Behandlungsstuhl hängt schwebend an der Wassereinheit)

Passen Sie Ihr Gerät an und wählen Sie aus verschiedenen Kopfpolstern Tray Ablagen, OP-Leuchten, Hygienesystemen usw.

Zum Patienten hin schwenkbares Mundspülbecken

Abnehmbares und sterilisierbares Mundspülbecken sowie Becheraufnahme

Kapazitive Tastatur des Helferinnenelements

Höhenverstellbares Tablet

SOFT Polsterung mit Memory-Schaum


Kabelloser Fußanlasser

Leicht anmutender Arm mit einem breiten Spektrum an Bewegungspositionen

Android-Display Touch-Expert-PRO

Laterale, schwebende Stuhlfunktion für verbesserte Ergonomie während der Arbeit

Verstellbare, abnehmbare und thermodesinfizierbare Instrumententrays und Silikonauflagen

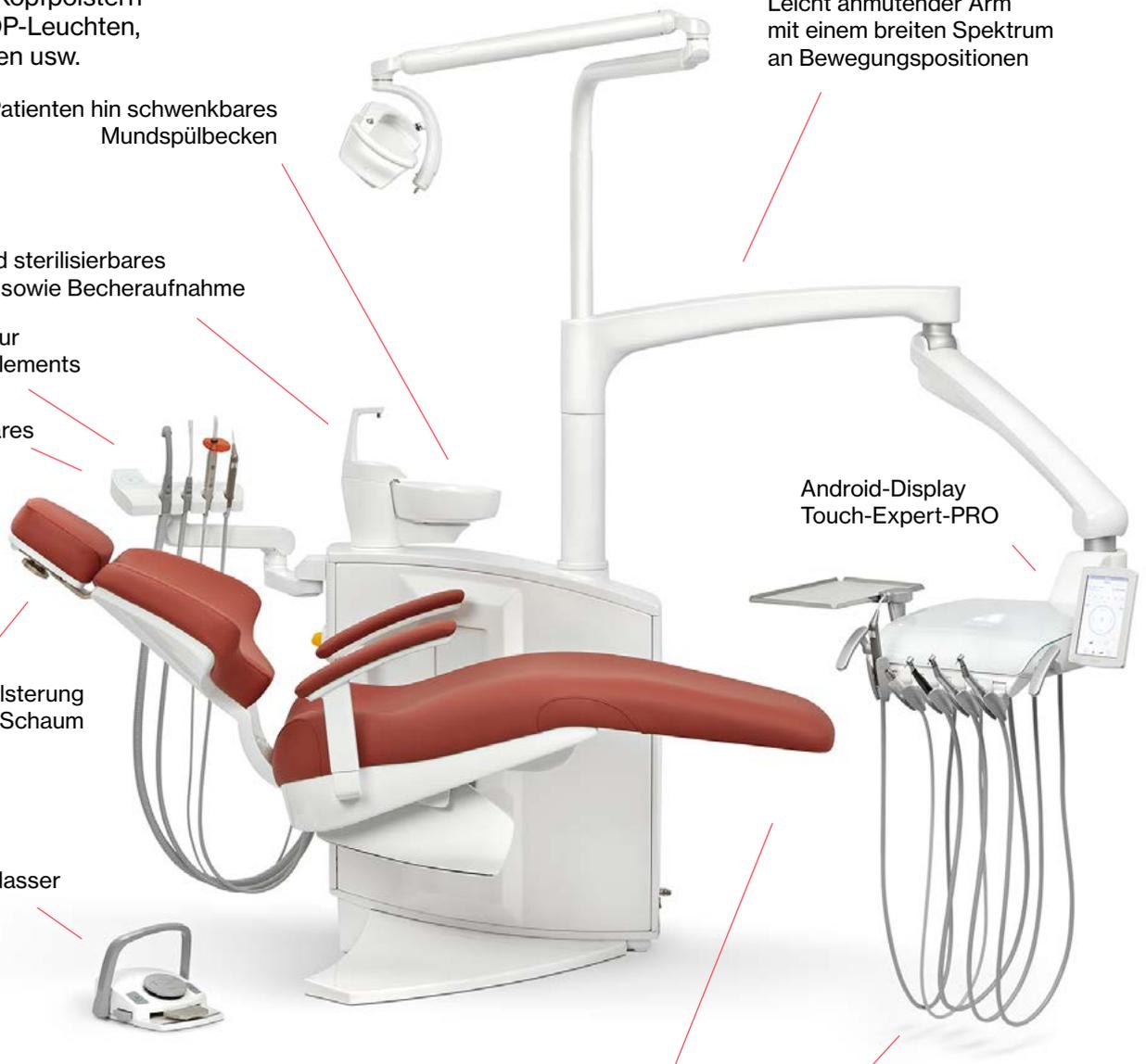

S 5H RC

Behandlungsplatz mit 90 Grad klappbarer Fußstütze an der schwebenden Patientenliege und hängenden Instrumentenschläuchen (Behandlungsstuhl hängt schwebend an der Wassereinheit)

Passen Sie Ihr Gerät an und wählen Sie aus verschiedenen Kopfpolstern Tray Ablagen, OP-Leuchten, Hygienesystemen usw.

Leicht anmutender Arm mit einem breiten Spektrum an Bewegungspositionen

Zum Patienten hin schwenkbares Mundspülbecken

Abnehmbares und sterilisierbares Mundspülbecken sowie Becheraufnahme

SOFT Polsterung mit Memory-Schaum

Kapazitive Tastatur des Helferinnenelements

Höhenverstellbares Tablet


Android-Display Touch-Expert-PRO

Kabelloser Fußanlasser

Laterale, schwebende Stuhlfunktion für verbesserte Ergonomie während der Arbeit

Stuhl mit 90° klappbarer Fußstütze

Verstellbare, abnehmbare und thermodesinfizierbare Instrumententrays und Silikonauflagen

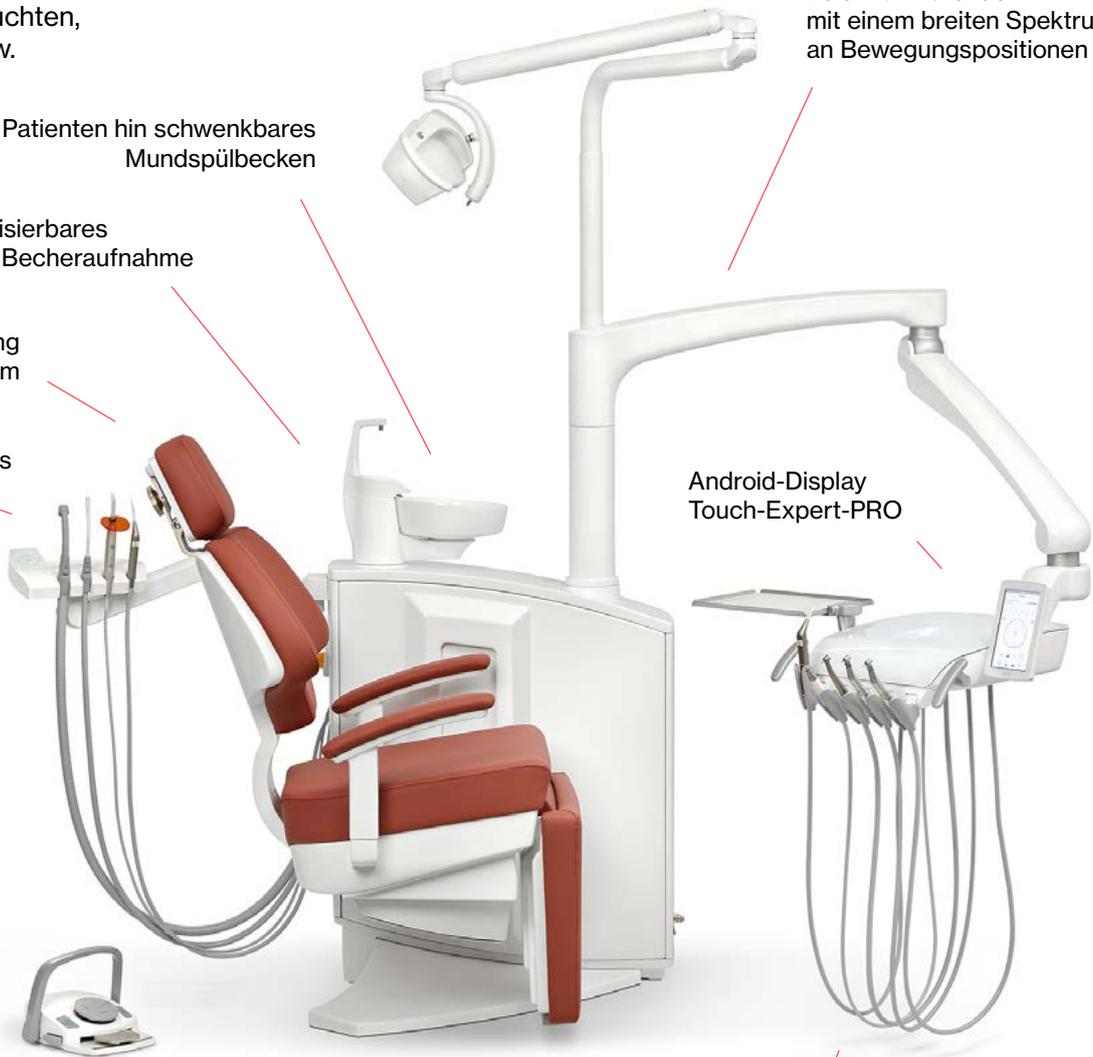

S 5C

Behandlungsplatz mit schwebender Standardpatientenliege und Cart

(Behandlungsstuhl hängt an der Wassereinheit ohne etwas darunter)

Passen Sie Ihr Gerät an und wählen Sie aus verschiedenen Kopfpolstern Tray Ablagen, OP-Leuchten, Hygienesystemen usw.

Zum Patienten hin schwenkbares Mundspülbecken

Abnehmbares und sterilisierbares Mundspülbecken sowie Becheraufnahme

Kapazitive Tastatur des Helferinnenelements

Höhenverstellbares Tablet

SOFT Polsterung mit Memory-Schaum


Kabelloser Fußanlasser

Android-Display Touch-Expert-PRO

Leicht höhenverstellbares Cart

Laterale, schwebende Stuhlfunktion für verbesserte Ergonomie während der Arbeit

Verstellbare, abnehmbare und thermodesinfizierbare Instrumententrays und Silikonauflagen

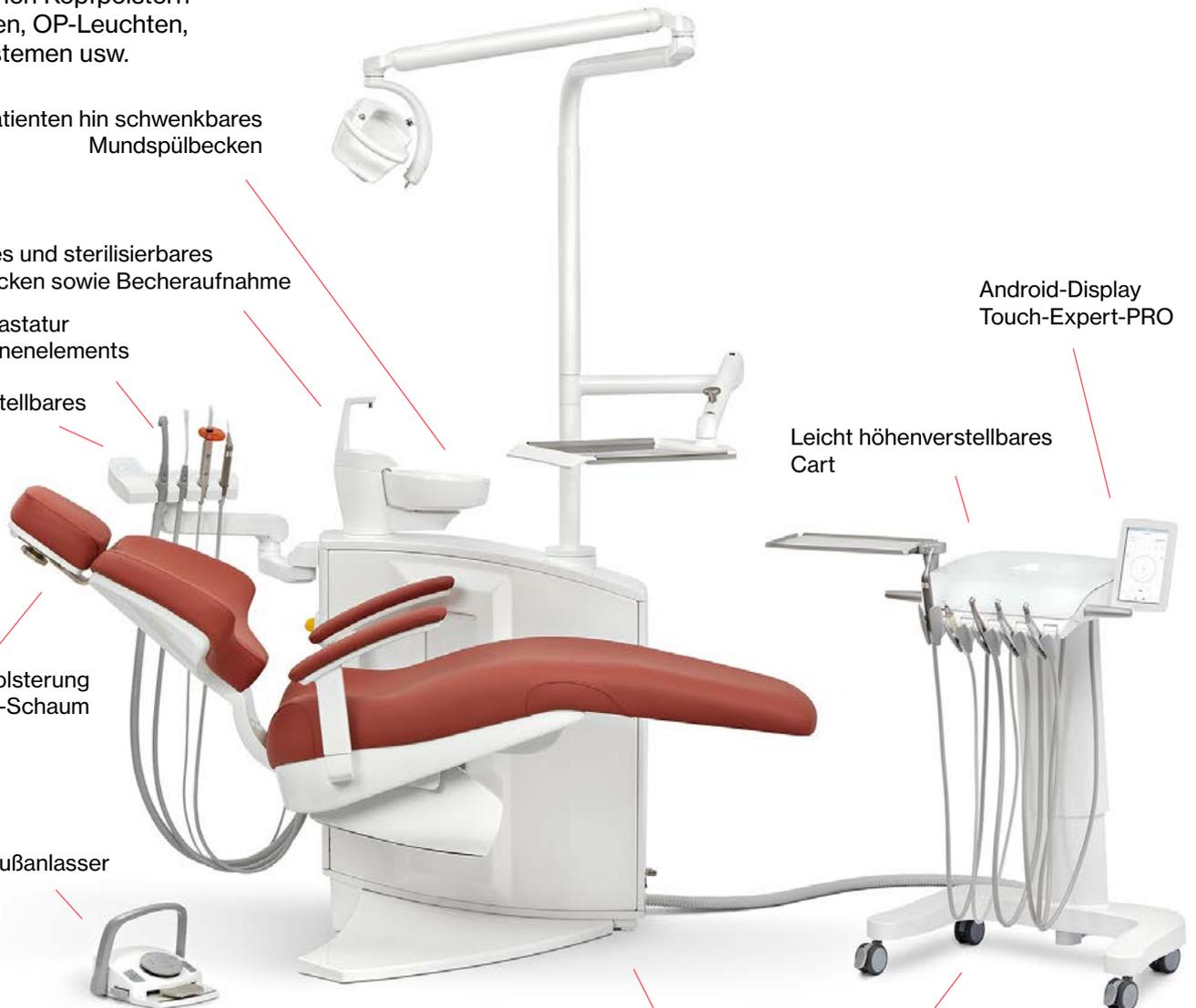


S 5C RC

Behandlungsplatz mit um 90 Grad klappbarer Fußstütze an der schwebenden Patientenliege und Cart

(Behandlungsstuhl hängt an der Wassereinheit ohne etwas darunter)

Passen Sie Ihr Gerät an und wählen Sie aus verschiedenen Kopfpolstern Tray Ablagen, OP-Leuchten, Hygienesystemen usw.

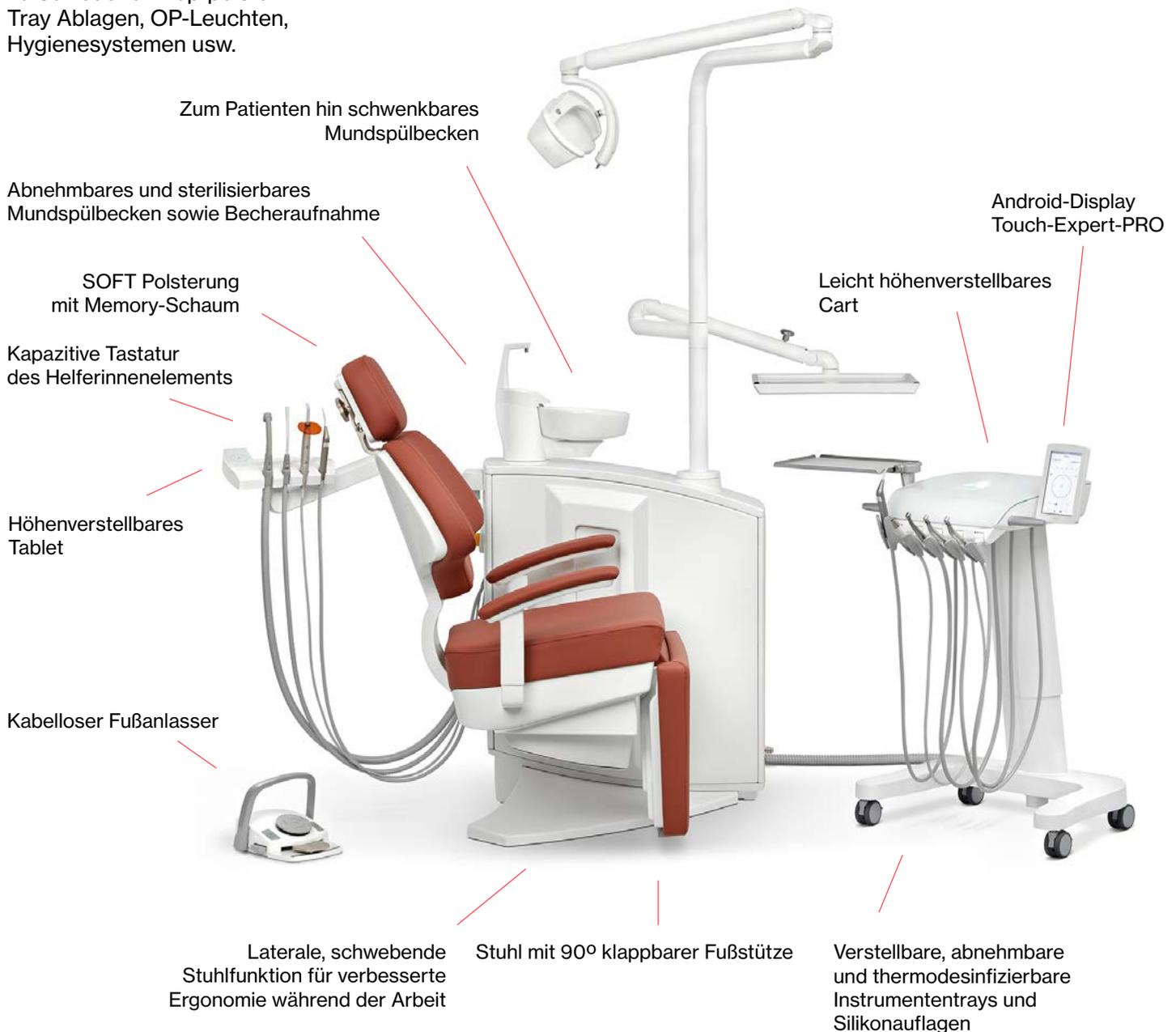

S Patientenstuhl mit 90 Grad klappbarer Fußstütze (ohne Wassereinheit) und mit Cart



Polsterungsfarben und -typen

Die SOFT-Reihe bietet folgende Farben:



810
BLACK



820
GRANITE



845
ASH



901
CAMEL



906
HAVANA



844
COFFEE



837
DARK BLUE



838
SPARKLING BLUE



839
TURQUOISE



904
AQUA



902
OLIVE



905
FOREST GREEN



843
BAMBOO



842
CORN



903
BURGUNDY



841
CARMIN



849
FUSHIA



907
MARBLE

Polsterfarben „Standard“:



400
Yellow



405
Purple



410
Pastel Blue



425
Silver Grey



435
Pearl Black



440
Pastel Green



445
Pearl Green



455
Pearl Blue



470
Dark Blue



475
Garnet



480
Gold

LED-Leuchten



Die neue Lampengeneration mit leistungsstarker LED-Technologie bietet zahlreiche Vorteile.

LED-Leuchten erzeugen eine natürliche Lichtqualität, die im Vergleich zu Halogenlicht eine klarere Sicht sicherstellen, da sie ein größeres Sichtfeld und weniger Schatten während der Behandlung liefern. Sie kühleres, weißeres Licht applizieren. LED-Leuchten haben eine längere Lebensdauer als Halogenlampen, erzeugen nur wenig Wärme und verbrauchen weniger Energie.



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

FARO EVA

FARO MAIA

G.COMM POLARIS

LICHTQUELLE	2 LED	2 LED	10 LED
FARBTEMPERATUR (°K)	von 2.700 K bis 5.700 K	5.000 K	von 4.200 K bis 5.800 K
BELEUCHTUNGSSTÄRKE (LUX)	von 11.000 bis 50.000 lux	von 3.000 bis 35.000 lux	von 8.000 bis 35.000 lux
FARBWIEDERGABEINDEX (CRI)	> 95	85	> 85
BELEUCHTETE FLÄCHE (MM)	190 x 100	170 x 85	140 x 70
STROMVERSORGUNG	24 VAC 50/60 Hz	17-24 VAC 50/60 Hz	12-24 VAC 50/60 Hz
VERBRAUCH	24 V CA 26 VA / 32 V CC 14 VA	9 VA	29 VA
GARANTIE	24 Monate	12 Monate	24 Monate
ZERTIFIZIERT GEMÄSS DER RICHTLINIE	93/42 CE Klasse I	93/42 CE Klasse I	93/42 CE Klasse I

Hocker

Möglichkeit der Polsterung mit den in unserer Farbpalette verfügbaren Farben.

Td 600



Td 700



Td 800



Bildgebungssysteme



24 VDC, hochauflösender (1.280 × 1.024) 22“-LCD-Monitor. Langlebiges, vielseitiges Hochleistungsdisplay mit einer breiten Palette integrierter Videooptionen, das speziell für medizinische Umgebungen entwickelt wurde. Antireflektierendes optisches Glas, Metallgehäuse.



Monitorarm mit doppelter Drehachse und vertikaler Neigung.

Micromotoren

Wählen Sie zwischen:



Verfügbar für:



Verfügbar für:



MORITA


EO Endo. Optimized.



Verfügbar für:



Integrierter MORITA Apex-Locator

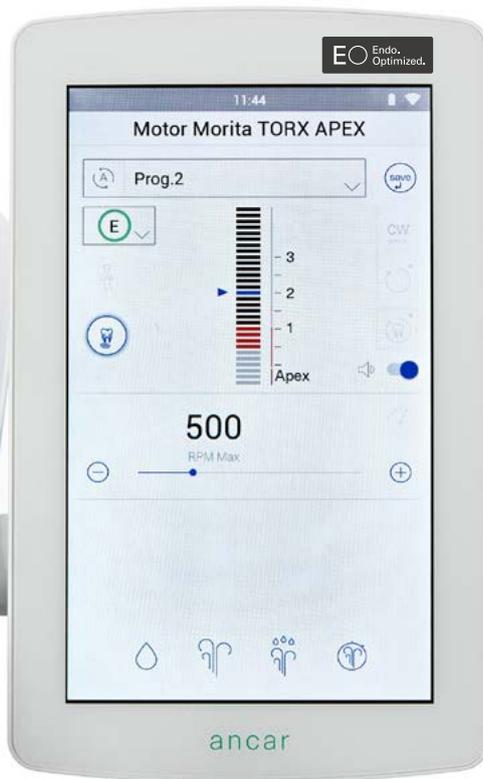

Wir stellen Ihnen die neueste Ergänzung unserer S-Line-Behandlungseinheiten vor: **Moritas integrierter Apex-Locator.**

- Moritas Spitzentechnologie kann selbst die kompliziertesten endodontischen Fälle bewältigen.
- Verabschieden Sie sich von der Mühe, zusätzliche Maschinen oder Geräte in der Zahnarztpraxis zu haben oder Batterien überprüfen zu müssen und Kabel herumliegen zu haben.
- Der in den Behandlungsstuhl integrierte Apex-Locator spart Platz und macht Ihre Arbeit einfacher und effizienter. Alles, was Sie brauchen, ist an einem Ort.

Zusätzlich wird der Apex Locator mit einem der folgenden Pakete geliefert:

• **Paket 1:**

Apex-Locator
+ 1 Mikromotor mit Winkelstück
+ 1 Turbine mit Kupplung

• **Paket 2:**


Apex-Locator
+ 1 Mikromotor mit Winkelstück
+ 2 Turbinen mit Kupplungen

• **Paket 3:**

Apex-Locator
+ 2 Mikromotoren mit Winkelstücken
+ 1 Turbine mit Kupplung



Trays (für Serie 3 und Ortho)

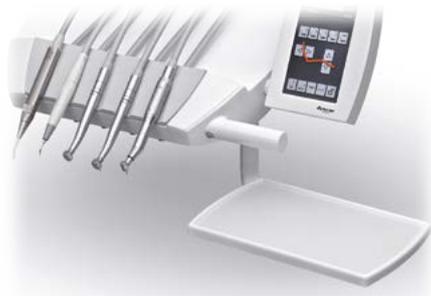

Standardhilfsablage (285 x 190 mm).



Große Hilfsablage (350 x 230 mm).



Doppelhilfsablage (410 x 310 mm).



Hilfsablage (400 x 300 mm).
Für die Ausführung mit Hängeschläuchen.
Inkl. zusätzlicher Spritzenhalter.



Ablage über der Assistenzhalterung.



Ancar UNI Tray

Ausziehbarer
Ablageträger mit
Silikonschutz.

Trays (für S Line Serie)



Standardtablett

Mit W-H-C-Systemen möglich
350 x 230 mm



Großes Tablett

Mit W-H-C-Systemen möglich
410 x 310 mm



Doppeltes Tablett

Nur mit dem H-System möglich
(2 x) 350 x 230 mm



Tablett auf Assistentenstütze



Ancar
UNI Tray

Kopfstütze

Standardkopfstütze

In der Serienausstattung enthalten, nachrüstbar auf die Kopfstütze mit 3D-Bewegung



Multifunktionale Kopfstütze mit Knickgelenk

Kopfstütze mit 3-D-Bewegung

Ergonomische Kopfstütze mit kugelförmiger Bewegung und pneumatischer oder manueller Bremse (optional)



170 mm vertikale Bewegung

Desinfektions- und Amalgamabscheidung

Desinfektion des Wassersystems



Typ Metasys WEK

- Wasserdekontamination für Instrumentenschläuche.
- Kombinierte und automatische Dekontaminationszyklen von Wasserkreisläufen in rotierenden Instrumenten.
- Ungiftige kontinuierliche und effektive Dekontaminationswirkung.
- Automatische Überwachung der Dosierung.

Desinfektion von Saugschläuchen

- H1-System zur kontinuierlichen Reinigung und vollständigen Desinfektion des Saugsystems.
- Eine zusätzliche manuelle Desinfektion ist nicht erforderlich.
- H1 beinhaltet das automatische Saugschlauchwahlssystem.



Typ Metasys H1

Wasserversorgungssystem



- Unabhängiges Wasserversorgungssystem für die Instrumente des Behandlungsplatzes.
- Der Wasserkreislauf des Geräts ist so ausgelegt, dass das Wasser bei einem Druckverlust nicht zurückfließen kann. Dadurch wird die Vermischung von Wasser aus verschiedenen Versorgungsquellen verhindert, sodass eine Kreuzkontamination mit Wasser aus dem öffentlichen Netz und umgekehrt ausgeschlossen ist.

„Bottle“ Wasserversorgungssystem

Amalgamabscheidesysteme


- Integrierte Amalgamabscheidesysteme und Separiersysteme mit Platzwahlventil: Trocken- oder Nassabsaugung.



Metasys MST 1



DÜRR CAS-1

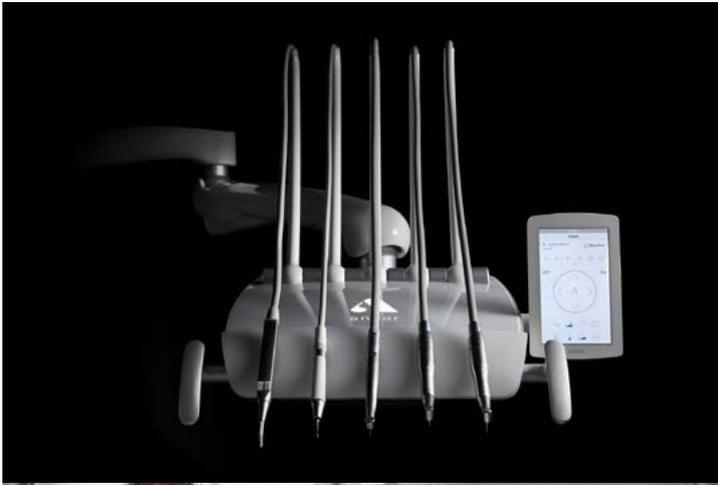

Rooted in Tradition, Driven by Technology, Crafted with Care

ancar-s.com · ancar-online.com

S

by Ancar



ancar

ancar@ancar-online.com

(+34) 937 540 797

C/ Volta dels Garrofers, 41-42
Pol. Ind. Els Garrofers
08340 Vilassar de Mar (Barcelona)

ancar-online.com · ancar-s.com