

Haben Sie einen Favoriten?

S
by Ancar



ancar

ancar-s.com
ancar-online.com



QS4 LEA 187 V2

Es freut uns, Sie kennenzulernen!

Ancar ist ein Unternehmen, das 1958 von Antoni Carles Pujol gegründet wurde. Unsere Geschichte begann in einer kleinen Werkstatt in Vilassar de Mar in Barcelona. Heute sind wir ein Unternehmen mit einer eigenen Fabrik, in der 70 Mitarbeiter jeden Tag ihr Bestes geben und zahnärztliche Behandlungsplätze von höchster Qualität herstellen.

Wir sind dafür bekannt, dass wir für unsere Behandlungseinheiten bei allen Strukturbauteilen Aluminium verwenden. Damit versprechen wir Ihnen, dass Sie mit unseren Einheiten jahrelang Freude haben werden. Durch die Kombination aus unserer jahrelangen Erfahrung bei der Herstellung von Qualitätsprodukten aus Aluminium, gepaart mit Ergonomie und dem technologischen Fortschritt stellen wir sicher, dass Ihr Gerät jahrzehntelang zuverlässig funktioniert. Die geschulten Techniker unserer Fachhändler garantieren Ihnen, dass unsere Geräte zuverlässig sind und nur den notwendigen Wartungsaufwand erforderlich machen. Ein zuverlässiges Gerät benötigt wenig oder bestens überhaupt keinen Kundendienst.

Wir sind Experten in der Entwicklung von ergonomischen, technologisch soliden Dentaleinheiten. Unser Ziel ist es eine dauerhafte Kundenbeziehungen aufzubauen und zu erhalten. Wir bieten eine breite Palette qualitativ hochwertiger Produkte an. Unser gesamtes Team zeichnet sich durch Freundlichkeit und einen außergewöhnlichen Servicegeist aus.

Mit freundlichen Grüßen,
Antoni Carles Bosch
Präsident



Antoni Carles Bosch
Präsident

Über Ancar

Ancar bietet seit 65 Jahren Behandlungsstühle an und konzentriert sich seit über 35 Jahren auf den Dentalbereich. In dieser Zeit sind wir als Marke innerhalb der Branche unaufhörlich gewachsen und haben an Bekanntheit gewonnen. In den vergangenen Jahren haben wir unsere gesammelten Erfahrungen genutzt, um uns weiterzuentwickeln und unsere eigene starke Identität zu etablieren und uns als Marke weiter im Markt zu platzieren.

Diese Arbeit hat uns dazu veranlasst, neue Wege auf allen Ebenen einzuschlagen, um unser Fortkommen als innovative Marke zu verstärken. Aus all diesen Prozessen und der damit verbundenen Arbeit, ist die neue S-Produktlinie entstanden. Dies ist eine neue Ära für das Unternehmen Ancar.



Unsere Fertigung

Ancar ist bekannt für seine erstklassige Fertigung und die verwendeten hochwertigen Materialien. Alle unsere Einheiten werden aus einer korrosionsbeständigen Aluminiumlegierung hergestellt, die in einer örtlichen Aluminiumgießerei gegossen wird, sodass unsere Dentaleinheiten robust sind und jahrelang halten. Wir garantieren Langlebigkeit und Robustheit durch den soliden Aufbau des Gerätes. Helle, stabile und zuverlässige Dentaleinheiten, die unsere Qualität und Handwerkskunst für Ihre ganz persönliche Zahnarztpraxis zur Verfügung stellen.

Die Qualität und die Langlebigkeit von Aluminium auch unter den extremsten Umgebungsbedingungen, in denen Robustheit, Sicherheit und Langlebigkeit an erster Stelle stehen, sind von unschätzbarem Wert. Das Material ist von Natur aus korrosionsbeständig, was dazu führt, die stabile Struktur des Behandlungsgeräts zu erhalten und seine Lebensdauer zu sichern. Außerdem ist das Material leicht und wird im Laufe der Jahre nicht so einfach kaputtgehen oder seine Oberfläche verändern. Bei richtiger Pflege wird Ihr Gerät auch in zehn Jahren noch genauso hell und glänzend aussehen wie am ersten Tag.



S

by Ancar

Einführung in die S Line

Entdecken Sie die neue S-Line von Ancar und lassen Sie sich überraschen, wie eine Dentaleinheit Ihre tägliche Arbeit verbessern und vereinfachen kann.

Moderne, elegante, ergonomische und an den wichtigen strukturellen Stellen komplett aus Aluminium hergestellte Dentaleinheit, die Ihre tägliche Arbeit erleichtert und an der Sie jahrzehntelang Freude haben werden. Die Einheit ist mit einem marktweit einzigartigen Android basierendem Display zur Bedienung ausgestattet. Damit kann jeder Behandlungsschritt vereinfacht werden, wodurch Ihre Arbeit bedeutend erleichtert wird.

Alle Ancar Dentaleinheiten können mit zahlreichen Optionen wie z.B. unterschiedlichen Tray Ablagen, Kopfstützen, Polsterungen, Farben, Hygieneoptionen wie Amalgamabscheider, Desinfektionssysteme der Instrumente oder Absaugungstechnik, verschiedenen Operationsleuchten usw. ausgestattet werden. Sprechen Sie Ihren Händler an, um weitere Auskünfte über die verfügbaren Optionen zu erhalten.



Einige der zahlreichen Eigenschaften:

ERGONOMIE UND KOMFORT

- Instrumentenköcher in der Neigung verstellbar, abnehmbar und sterilisierbar bei hängendem Schlauch-System oder beim Cart.
- Instrumentenschläuche mit 3D-Bewegungsfreiheit (von vorne nach hinten und von links nach rechts) beim Schwingbügel-System am Arzttisch.
- kabelloser Fußanlasser ist Standard und inklusive.
- Um 70° schwenkbare Wassereinheit für besseren Zugang zum Patienten von beiden Seiten her (nur bei S3-Modellen).
- Höhenverstellbarer Helferinnenarm mit kapazitiver Tastatur zur Bedienung der Einheit.
- Ergonomische Griffe am Arzttisch für besseres Handling.
- Wassereinheit kann für Linkshänder auf der rechten Stuhlseite montiert werden (nur bei S3-Modellen).
- Möglichkeit, den Arm der Absaugschläuche an der Rückseite des Stuhls zu befestigen, um ihn für Links- bzw. Rechtshänder bedienbar zu machen (nur bei S3-Modellen mit Standard-Patientenstuhl).
- Leicht höhenverstellbares Cart.

HYGIENE

- Mundspülbecken und Becherhalter sind abnehmbar. Beides ist thermodesinfizierbar.
- Abnehmbare und thermodesinfizierbare Standard-Saugschläuche.
- Optimiertes Design für einfache Reinigung und Desinfektion.
- Abnehmbare und desinfizierbare Instrumentenablage mit Silikoneinlagen.

TECHNOLOGIE

- Stuhlbewegungen vom Fußanlasser und von der Arzt- bzw. Helferinnen-Tastatur steuerbar.
- Die Intensität der OP-Leuchte ist über den Lampenschalter regulierbar.
- Inkl. Touchscreen Touch Expert Pro (Android basierend).



Touch expert PRO™

**Ein Display, das Sie bei jeder Behandlung unterstützt.
Eine Oberfläche, die so einfach zu bedienen ist, wie Ihr Smartphone.**

Das neue TOUCH EXPERT PRO ist ein auf ANDROID-basiertes Display, dass Sie bei der täglichen Arbeit unterstützen wird. Es ist unmöglich, alle Eigenschaften dieses Displays auf einer einzigen Seite zu beschreiben. Hier sollen einige der wichtigen Vorteile beschrieben werden:

Benutzerfreundliches, schwenkbares 7"-Multitouch-Farbdisplay mit IPS-Technologie.

Unbeschränkte Anzahl von Behandler-Profilen, für die personalisierte Konfiguration der Einheit.

Praxis- bzw. Klinik-Name, Datum und Uhrzeit sowie die Möglichkeit, auf jedem Bildschirm ein Logo zu hinterlegen.

Laden Sie Röntgenbilder und Fotos hoch und sehen Sie sich Bilder, Videos und Gerätehandbücher direkt auf dem Bediendisplay am Gerät an.

Programmierung der Betriebsparameter des Ultraschall-Scalers in ENDO, PERIO, SCALER. Die Leistung und Lichtstärke der Instrumente können für jede Instrumentenline eingestellt werden. Einstellung der Mikromotorbetriebsparameter (mit ENDO-Funktion) Drehmomentsteuerung in Ncm, Drehrichtung im Rechts- oder Linkslauf, Spraysteuerung (Spray / Wasser / Luft). Winkelstückübersetzung und zwei Geschwindigkeitsprofile: von 200 bis 40.000 U/min und von 100 bis 4.000 U/min.

Entdecken Sie, wie der Touch Expert Pro Ihre tägliche Arbeit unterstützt und vereinbaren Sie einen Termin bei Ihrem nächsten Ancar-Händler. Finden Sie Ihren Händler unter www.ancar-s.com.





Konfigurieren Sie Ihren idealen S3 Behandlungsplatz

Mit all den oben erwähnten technologischen und ergonomischen Vorteilen ist das Modell S3 die kompakteste und vielseitigste Variante der neuen S-Line.

Mit der vom Stuhl getrennten und auf dem Boden montierten Wassereinheit kann die S3 sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder installiert und aufgebaut werden.

Sie können Ihr bevorzugtes Instrumentensystem wählen: W (Wipp = Schwingbügelsystem), H (Hanging = hängende Schläuche) oder C (Cart). Diese flexiblen Konfiguration-Optionen bieten eine Vielzahl von Möglichkeiten hinsichtlich der gewünschten Ergonomie. Da ist für jeden Zahnarzt das passende verfügbar.

Die S3 Modelle können je nach Bedarf und gewünschtem Komfort auch mit einer Standardpatientenliege- oder mit einer Patientenliege die ein klappbares Fußteil hat, ausgestattet werden.



S^{3W}



S^{3H}



S^{3C}



S^{3W RC}



S^{3H RC}



S^{3C RC}



Die S3 Modelle sind modern, stilvoll und ergonomisch und bestehen an den wichtigen Stellen vollständig aus Aluminium, was Ihnen die tägliche Arbeit erleichtert und an dem Sie jahrelang Freude haben werden - garantiert. Die Einheit ist mit einem marktweltweit einzigartigen Display auf der Android Basis ausgestattet. Damit kann jeder Behandlungsschritt optimiert werden, wodurch Ihre Arbeit bedeutend erleichtert werden wird.

Alle S3 Dentaleinheiten können mit zahlreichen Optionen wie z. B. unterschiedlichen Tray Ablagen, Kopfstützen, Polsterungen, Farben, Hygieneoptionen wie Amalgamabscheider, Desinfizierungssysteme der Instrumente oder Absaugungsschläuche, verschiedene Operationsleuchten usw. ausgestattet werden. Bitte Sie Ihren Händler um weitere Auskünfte über alle verfügbaren Optionen.

S **3W**

Standard-Patientenstuhl mit Peitschensystem

Passen Sie Ihr Gerät
an und wählen Sie aus
verschiedenen Kopfpolstern
Tray Ablagen, OP-Leuchten,
Hygienesystemen usw.

Abnehmbares und sterilisierbares
Mundspülbecken sowie Becheraufnahme

SOFT Polsterung
mit Memory-Schaum

Kapazitive Tastatur
des Helferinnenelements.
Keine Folientastatur.
Glatte Oberfläche

Höhenverstellbares Tablet

Leicht anmutender Arm mit einem breiten
Spektrum an Bewegungspositionen


Schwingbügelsystem mit
3D-Bewegungsfreiheit der
Schwingbügel

Android-Display
Touch-Expert-PRO

70°-Schwenkbereich
der Wassereinheit für bessere
Zugänglichkeit zum Patienten

Kabelloser Fußanlasser

Absaugarm montierbar
auf der Rückseite der Patientenliege
(Option) für Rechts- Linkshänder
Bedienung oder aber Standard an
der Wassereinheit adaptiert

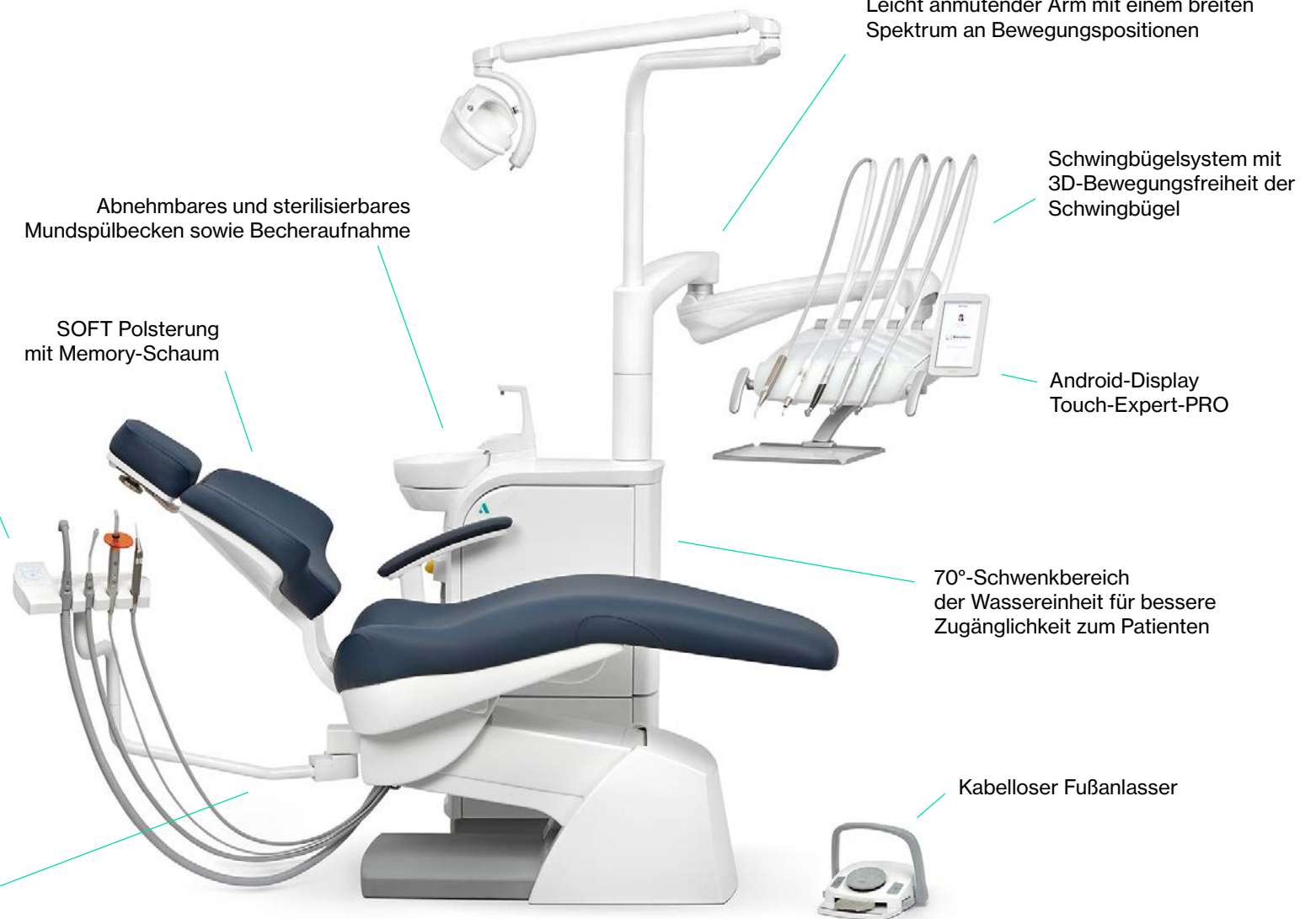



Ergonomie und Komfort

- Lange Instrumentenschläuche für mehr 3D-Bewegungsfreiheit (von links nach rechts und auch umgekehrt möglich)
- kabelloser Fußanlasser ist Standard
- Um 70° schwenkbare Wassereinheit für den besseren Zugang der Assistenz zum Patienten. Je nach Montage der Wassereinheit auf der jeweiligen Seite der Patientenliege
- Höhenverstellbares Helferinnenelement (in 3 Stufen) mit kapazitiver, glatter Tastatu
- Ergonomische Griffe am Arzttisch für besseres Handling
- Selektives, ventilgesteuertes Saugschlauchsystem (nur der entnommene Saugschlauch saugt auch)
- Wassereinheit kann für Linkshänder auch auf der rechten Stuhlseite montiert werde
- Saugschlaucharm kann für die Linkshänder Bedienung unterhalb der Rückenlehne an der Rückseite des Behandlungstuhls montiert werden (je nach Kundenwunsch)

Hygiene

- Mundspülbeckenkeramik, Becherfüllerrohr und Becherhalter sind abnehmbar
- Abziehbare und thermodesinfizierbare Absaugungsschläuche von bekannten Markenherstellern
- Geeignetes Design für einfache Reinigung und Desinfektion der Einheit
- Abnehmbare und desinfizierbare Trays für Instrumentenablage mit Silikoneinlagen

Technologie

- Stuhlbewegungen sowohl mit dem Fußanlasser, Arztelementdisplay als auch von der Assistenzseite bedienbar
- Möglichkeit der Lichtstärkeneinstellung der OP-Lampe über den Lampenschalter anzupassen
- Inkl. Touchscreen Display Touch-Expert-Pro



Liegender Patientenstuhl mit um 90 Grad klappbarer Fußstütze und Peitschensystem

Passen Sie Ihr Gerät
an und wählen Sie aus
verschiedenen Kopfpolstern
Tray Ablagen, OP-Leuchten,
Hygienesystemen usw.

Abnehmbares und sterilisierbares
Mundspülbecken sowie Becheraufnahme

SOFT Polsterung
mit Memory-Schaum

Kapazitive Tastatur des Helferinnenelements.
Keine Folientastatur. Glatte Oberfläche

Höhenverstellbares Tablet

Kabelloser Fußanlasser


Leicht anmutender Arm mit einem breiten
Spektrum an Bewegungspositionen

Schwingbügelsystem mit
3D-Bewegungsfreiheit der
Schwingbügel

Android-Display
Touch-Expert-PRO

70°-Schwenkbereich
der Wassereinheit für bessere
Zugänglichkeit zum Patienten

Stuhl mit 90° klappbarer Fußstütze

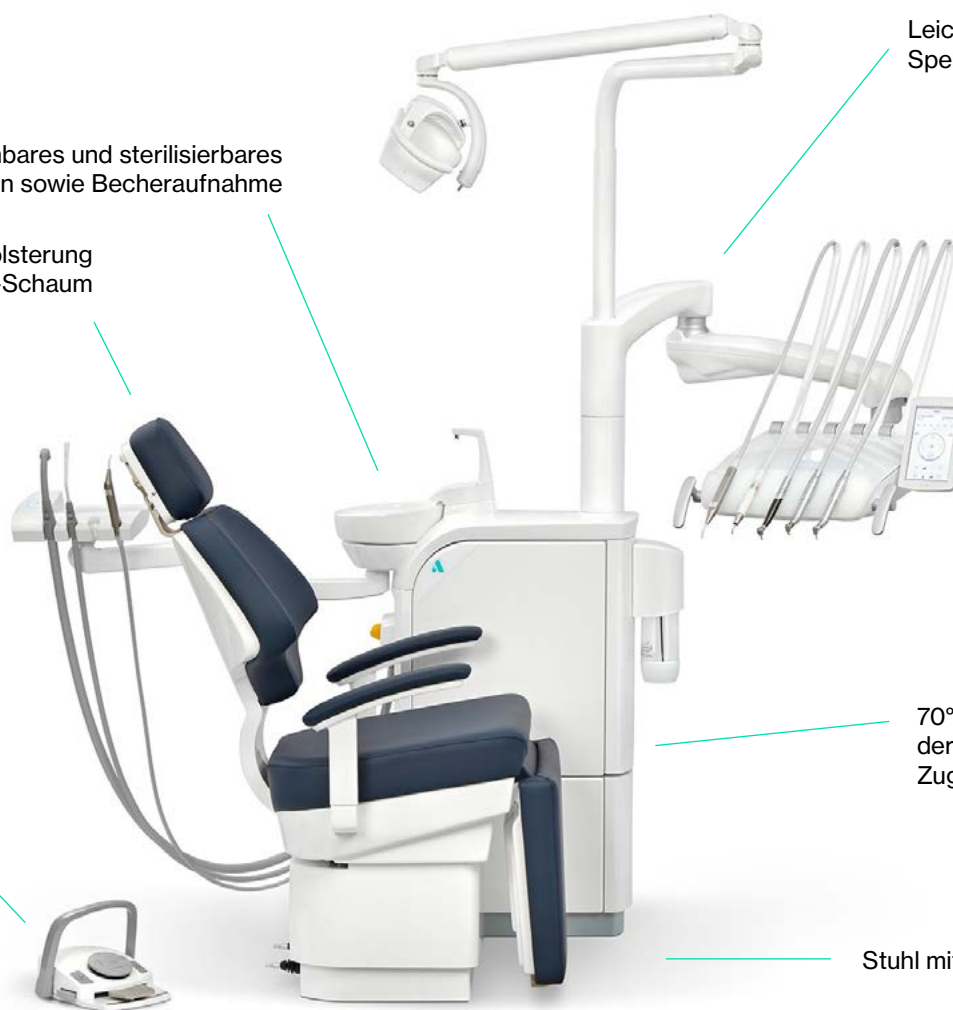



Ergonomie und Komfort

- Der Stuhl mit klappbarer und einstellbarer Fußstütze erleichtert den Patienten das Ein- und Aussteigen in den Behandlungsstuhl
- Hervorragend für kleine Räume, da der Behandlungsstuhl mit geklappter Fußstütze wenig Platz benötigt
- Ideal für Frontalaufnahmen am Patienten, da Sie sich zur Aufnahme optimal und vor dem Patienten positionieren können
- Bessere Frontalsicht auf den Patienten
- Lange Instrumentenschläuche mit 3D-Bewegungsfreiheit (von links nach rechts und umgekehrt)
- kabelloser Fußanlasser
- Um 70° schwenkbare Wassereinheit für besseren Zugang an den Patienten von beiden Seiten her
- Höhenverstellbares Helferinnenelement mit kapazitiver Tastatur
- Ergonomische Griffe für besseres Handling
- Selektives Saugsystem für die Absaugungsschläuche
- Wassereinheit kann für Linkshänder auf der rechten Stuhlseite montiert werden

Hygiene

- Mundspülbeckenkeramik, Becherfüllerrohr und Becherhalter sind abnehmbar
- Abziehbare und thermodesinfizierbare Absaugungsschläuche von bekannten Markenherstellern
- Geeignetes Design für einfache Reinigung und Desinfektion der Einheit
- Abnehmbare und desinfizierbare Trays für Instrumentenablage mit Silikoneinlagen

Technologie

- Stuhlbewegungen sowohl mit dem Fußanlasser, Arztelementdisplay als auch von der Assistenzseite bedienbar
- Möglichkeit der Lichtstärkeneinstellung der OP-Lampe über den Lampenschalter anzupassen
- Inkl. Touchscreen Display Touch-Expert-Pro



Standard-Patientenstuhl mit hängenden Instrumentenschläuchen

Passen Sie Ihr Gerät
an und wählen Sie aus
verschiedenen Kopfpolstern
Tray Ablagen, OP-Leuchten,
Hygienesystemen usw.

Abnehmbares und sterilisierbares
Mundspülbecken sowie Becheraufnahme

Kapazitive Tastatur des Helferinnenelements.
Keine Folientastatur. Glatte Oberfläche

Höhenverstellbares Tablet

70°-Schwenkbereich der Wassereinheit
für bessere Zugänglichkeit zum Patienten

Leicht anmutender Arm mit einem breiten
Spektrum an Bewegungspositionen


Android-Display
Touch-Expert-PRO

SOFT Polsterung
mit Memory-Schaum

Kabelloser Fußanlasser

Verstellbare, abnehmbare
und thermodesinfizierbare
Instrumententrays und
Silikonauflagen

Absaugarm montierbar auf der
Rückseite der Patientenliege
(Option) für Rechts- Linkshänder
Bedienung oder aber Standard
an der Wassereinheit adaptiert

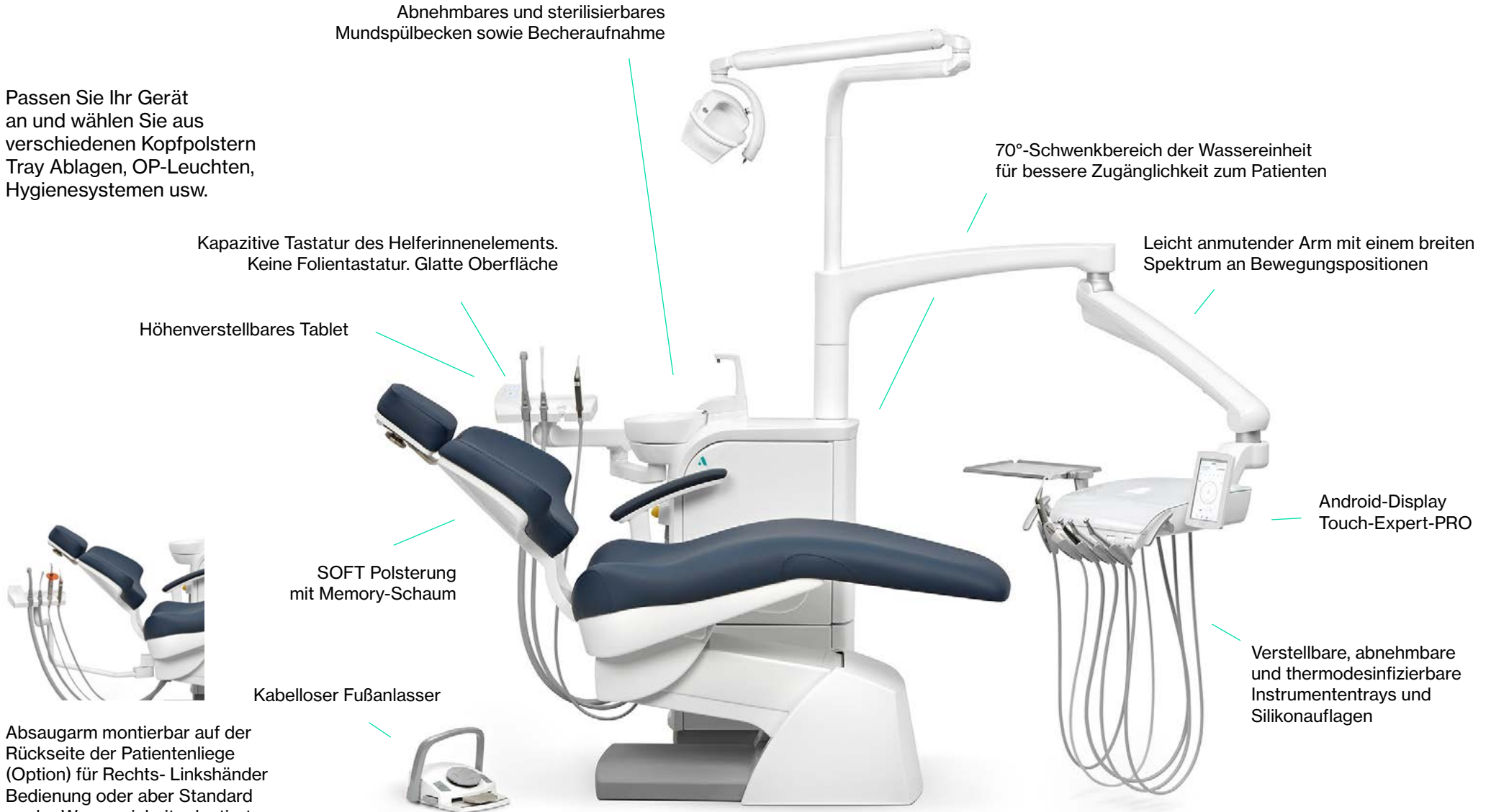



Ergonomie und Komfort

- Einstellbare, abnehmbare und desinfizierbare Instrumenten-Trays
- Inklusive kabellosem Fußanlasser
- Um 70° schwenkbare Wassereinheit für besseren Zugang zum Patienten von beiden Seiten
- Höhenverstellbarer Helferinnenarm mit kapazitiver Tastatur
- Sehr weiche Bewegung des Tragarms für den Arzttisch
- Ergonomische Griffe für besseres Handling
- Selektives, ventilgesteuertes Saugschlauchsystem (nur der entnommene Saugschlauch saugt auch)
- Wassereinheit kann für Linkshänder auch auf der rechten Stuhlseite montiert werden
- Saugschlaucharm kann für die Linkshänder Bedienung unterhalb der Rückenlehne an der Rückseite des Behandlungsstuhls montiert werden (je nach Kundenwunsch)

Hygiene

- Mundspülbeckenkeramik, Becherfüllerrohr und Becherhalter sind abnehmbar
- Abziehbare und thermodesinfizierbare Absaugungsschläuche von bekannten Markenherstellern
- Geeignetes Design für einfache Reinigung und Desinfektion der Einheit
- Abnehmbare und desinfizierbare Trays für Instrumentenablage mit Silikoneinlagen

Technologie

- Stuhlbewegungen sowohl mit dem Fußanlasser, Arztelementdisplay als auch von der Assistenzseite bedienbar
- Möglichkeit der Lichtstärkeneinstellung der OP-Lampe über den Lampenschalter anzupassen
- Inkl. Touchscreen Display Touch-Expert-Pro



Liegender Patientenstuhl mit um 90 Grad klappbarer Fußstütze und hängenden Instrumentenschläuchen

Passen Sie Ihr Gerät
an und wählen Sie aus
verschiedenen Kopfpolstern
Tray Ablagen, OP-Leuchten,
Hygienesystemen usw.

Abnehmbares und sterilisierbares
Mundspülbecken sowie Becheraufnahme

70°-Schwenkbereich der Wassereinheit
für bessere Zugänglichkeit zum Patienten

SOFT Polsterung
mit Memory-Schaum

Leicht anmutender Arm
mit einem breiten Spektrum
an Bewegungspositionen

Kapazitive Tastatur des Helferinnenelements.
Keine Folientastatur. Glatte Oberfläche

Höhenverstellbares Tablet

Android-Display
Touch-Expert-PRO

Stuhl mit 90° klappbarer Fußstütze

Verstellbare, abnehmbare
und thermodesinfizierbare
Instrumententrays und
Silikonauflagen

Kabelloser Fußanlasser





Ergonomie und Komfort

- Der Stuhl mit klappbarer und einstellbarer Fußstütze erleichtert den Patienten das Ein- und Aussteigen in den Behandlungsstuhl
- Hervorragend für kleine Räume, da der Behandlungsstuhl mit geklappter Fußstütze wenig Platz benötigt
- Ideal für Frontalaufnahmen am Patienten, da Sie sich zur Aufnahme optimal und vor dem Patienten positionieren können
- Bessere Frontalsicht auf den Patienten
- Einstellbare, abnehmbare und desinfizierbare Instrumenten-Trays
- Inklusive kabelloser Fußanlasser
- Um 70° schwenkbare Wassereinheit für besseren Zugang an den Patienten von beiden Seiten her
- Höhenverstellbares Helferinnenelement mit kapazitiver Tastatur
- Sehr weiche Bewegung des Tragarms für den Arzttisch
- Ergonomische Griffe für besseres Handling
- Selektives Saugsystem für die Absaugungsschläuche
- Wassereinheit kann für Linkshänder auf der rechten Stuhlseite montiert werden

Hygiene

- Mundspülbeckenkeramik, Becherfüllerrohr und Becherhalter sind abnehmbar
- Abziehbare und thermodesinfizierbare Absaugungsschläuche von bekannten Markenherstellern
- Geeignetes Design für einfache Reinigung und Desinfektion der Einheit
- Abnehmbare und desinfizierbare Trays für Instrumentenablage mit Silikoneinlagen

Technologie

- Stuhlbewegungen sowohl mit dem Fußanlasser, Arztelementdisplay als auch von der Assistenzseite bedienbar
- Möglichkeit der Lichtstärkeneinstellung der OP-Lampe über den Lampenschalter anzupassen
- Inkl. Touchscreen Display Touch-Expert-Pro

S^{3C}

Standard-Patientenstuhl und Cart

Passen Sie Ihr Gerät
an und wählen Sie aus
verschiedenen Kopfpolstern
Tray Ablagen, OP-Leuchten,
Hygienesystemen usw.

Abnehmbares und sterilisierbares
Mundspülbecken sowie Becheraufnahme

Kapazitive Tastatur des Helferinnenelements.
Keine Folientastatur. Glatte Oberfläche

Höhenverstellbares Tablet

70°-Schwenkbereich der Wassereinheit
für bessere Zugänglichkeit zum Patienten

Android-Display
Touch-Expert-PRO

Leicht höhenverstellbares
Cart

Verstellbare, abnehmbare
und thermodesinfizierbare
Instrumententrays und
Silikonauflagen

SOFT Polsterung
mit Memory-Schaum

Kabelloser Fußanlasser



Absaugarm montierbar auf der
Rückseite der Patientenliege
(Option) für Rechts- Linkshänder
Bedienung oder aber Standard
an der Wassereinheit adaptiert





Ergonomie und Komfort

- Einstellbare, abnehmbare und desinfizierbare Instrumenten-Trays
- Inklusive kabellosem Fußanlasser
- Um 70° schwenkbare Wassereinheit für besseren Zugang zum Patienten von beiden Seiten
- Höhenverstellbarer Helferinnenarm mit kapazitiver Tastatur
- Ergonomische Griffe für besseres Handling
- Selektives, ventilsteuertes Saugschlauchsystem (nur der entnommene Saugschlauch saugt auch)
- Wassereinheit kann für Linkshänder auch auf der rechten Stuhlseite montiert werden
- Saugschlaucharm kann für die Linkshänder Bedienung unterhalb der Rückenlehne an der Rückseite des Behandlungstuhls montiert werden (je nach Kundenwunsch)
- Leicht höhenverstellbares Cart

Hygiene

- Mundspülbeckenkeramik, Becherfüllerrohr und Becherhalter sind abnehmbar
- Abziehbare und thermodesinfizierbare Absaugungsschläuche von bekannten Markenherstellern
- Geeignetes Design für einfache Reinigung und Desinfektion der Einheit
- Abnehmbare und desinfizierbare Trays für Instrumentenablage mit Silikoneinlagen

Technologie

- Stuhlbewegungen sowohl mit dem Fußanlasser, Arztelementdisplay als auch von der Assistenzseite bedienbar
- Möglichkeit der Lichtstärkeneinstellung der OP-Lampe über den Lampenschalter anzupassen
- Inkl. Touchscreen Display Touch-Expert-Pro



Liegender Patientenstuhl mit um 90 Grad klappbarer Fußstütze und Cart

Passen Sie Ihr Gerät
an und wählen Sie aus
verschiedenen Kopfpolstern
Tray Ablagen, OP-Leuchten,
Hygienesystemen usw.

Abnehmbares und sterilisierbares
Mundspülbecken sowie Becheraufnahme

SOFT Polsterung
mit Memory-Schaum

Kapazitive Tastatur des Helferinnenelements.
Keine Folientastatur. Glatte Oberfläche

Höhenverstellbares Tablet

Stuhl mit 90° klappbarer Fußstütze

Kabelloser Fußanlasser

70°-Schwenkbereich der Wassereinheit
für bessere Zugänglichkeit zum Patienten

Android-Display
Touch-Expert-PRO

Leicht höhenverstellbares
Cart

Verstellbare, abnehmbare
und thermodesinfizierbare
Instrumententrays und
Silikonauflagen





Ergonomie und Komfort

- Der Stuhl mit klappbarer und einstellbarer Fußstütze erleichtert den Patienten das Ein- und Aussteigen in den Behandlungsstuhl
- Hervorragend für kleine Räume, da der Behandlungsstuhl mit geklappter Fußstütze wenig Platz benötigt
- Ideal für Frontalaufnahmen am Patienten, da Sie sich zur Aufnahme optimal und vor dem Patienten positionieren können
- Bessere Frontalsicht auf den Patienten
- Einstellbare, abnehmbare und desinfizierbare Instrumenten-Trays
- Sehr weiche Bewegung des Tragarms für den Arzttisch
- Inklusive kabelloser Fußanlasser
- Um 70° schwenkbare Wassereinheit für besseren Zugang an den Patienten von beiden Seiten her
- Höhenverstellbares Helferinnenelement mit kapazitiver Tastatur
- Leicht höhenverstellbares Cart
- Ergonomische Griffe für besseres Handling
- Selektives Saugsystem für die Absaugungsschläuche
- Wassereinheit kann für Linkshänder auf der rechten Stuhlseite montiert werden

Hygiene

- Mundspülbeckenkeramik, Becherfüllerrohr und Becherhalter sind abnehmbar
- Abziehbare und thermodesinfizierbare Absaugungsschläuche von bekannten Markenherstellern
- Geeignetes Design für einfache Reinigung und Desinfektion der Einheit
- Abnehmbare und desinfizierbare Trays für Instrumentenablage mit Silikoneinlagen

Technologie

- Stuhlbewegungen sowohl mit dem Fußanlasser, Arztelementdisplay als auch von der Assistenzseite bedienbar
- Möglichkeit der Lichtstärkeneinstellung der OP-Lampe über den Lampenschalter anzupassen
- Inkl. Touchscreen Display Touch-Expert-Pro



Konfigurieren Sie Ihren idealen S5 Behandlungsplatz

Das Modell S5 bietet die umfassendsten Optionen und bietet den meisten Komfort für den Behandler. Dieses Modell hat eine am Boden montierte Wassereinheit, an dem der Patientenstuhl „hängt“. Dadurch bleibt der Raum unter dem Stuhl völlig frei und bietet mehr Platz, um den Fußanlasser in die gewünschten Positionen zu bringen, sowie mehr Sitzpositionen und Beinfreiheit.

Die Wahl zwischen der Standardpatientenliege oder einer Patientenliege mit klappbarer Fußstütze ist das Tüpfelchen auf dem i. Die Patientenliege ist gebaut für den besten Komfort Ihrer Patienten und verbessert die Kommunikation zwischen Zahnarzt und Patient. Es ist die beste Wahl zur Erstellung von Behandlungsfotos, da diese Patientenliege die Möglichkeit bietet, Frontalfotos vom Patienten ohne Mittellinienverzerrung zu machen. Das Gerät verfügt über eine schwenkbare Speifontäne und kann mit drei Instrumentenführungen konfiguriert werden: W (Wipp = Schwingbügelsystem), H (Hanging = hängende Schläuche) oder C (Cart).



S^{5W}



S^{5H}



S^{5C}



S^{5W RC}



S^{5H RC}



S^{5C RC}



Die Gerätemodelle S5 sind modern, stilvoll und ergonomisch und bestehen an den wichtigen Stellen vollständig aus Aluminium, was Ihnen die tägliche Arbeit erleichtert und an dem Sie jahrelang Freude haben werden - garantiert. Die Einheit ist mit einem marktweltweit einzigartigen Display auf der Android-Basis ausgestattet. Damit kann jeder Behandlungsschritt optimiert werden, wodurch Ihre Arbeit bedeutend erleichtert werden wird.

Alle S5 Dentaleinheiten können mit zahlreichen Optionen wie z. B. unterschiedlichen Tray Ablagen, Kopfstützen, Polsterungen, Farben, Hygieneoptionen wie Amalgamabscheider, Desinfizierungssysteme der Instrumente oder Absaugungsschläuche, verschiedene Operationsleuchten usw. ausgestattet werden. Bitte Sie Ihren Händler um weitere Auskünfte über alle verfügbaren Optionen.



Behandlungsplatz mit schwebender Standardpatientenliege und Peitschensystem

(Behandlungstuhl hängt schwebend an der Wassereinheit)

Passen Sie Ihr Gerät an und wählen Sie aus verschiedenen Kopfpolstern Tray Ablagen, OP-Leuchten, Hygienesystemen usw.

Zum Patienten hin schwenkbares Mundspülbecken

Abnehmbares und sterilisierbares Mundspülbecken sowie Becheraufnahme

Kapazitive Tastatur des Helferinnenelements. Keine Folientastatur. Glatte Oberfläche

Höhenverstellbares Tablet

SOFT Polsterung mit Memory-Schaum


Kabelloser Fußanlasser

Leicht anmutender Arm mit einem breiten Spektrum an Bewegungspositionen

Schwingbügelsystem mit 3D-Bewegungsfreiheit der Schwingbügel

Android-Display Touch-Expert-PRO

Laterale, schwebende Stuhlfunktion für verbesserte Ergonomie während der Arbeit

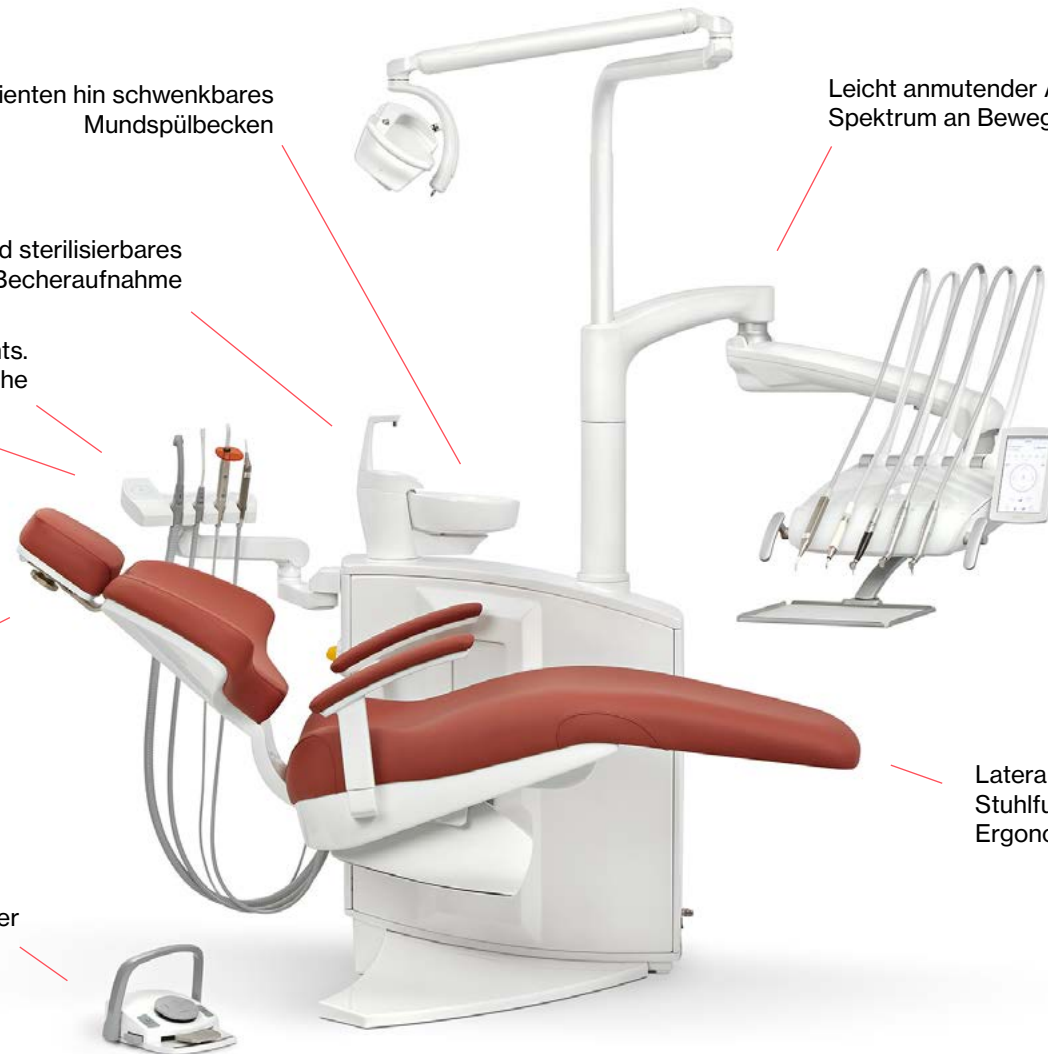



Ergonomie und Komfort

- Lange Instrumentenschläuche für mehr 3D-Bewegungsfreiheit (von links nach rechts und auch umgekehrt möglich)
- kabelloser Fußanlasser ist Standard
- Höhenverstellbares Helferinnenelement (in 3 Stufen) mit kapazitiver, glatter Tastatur
- Ergonomische Griffe am Arzttisch für besseres Handling
- Selektives, ventilsteuertes Saugschlauchsystem (nur der entnommene Saugschlauch saugt auch)

Hygiene

- Mundspülbeckenkeramik, Becherfüllerrohr und Becherhalter sind abnehmbar
- Abziehbare und thermodesinfizierbare Absaugungsschläuche von bekannten Markenherstellern
- Geeignetes Design für einfache Reinigung und Desinfektion der Einheit
- Abnehmbare und desinfizierbare Trays für Instrumentenablage mit Silikoneinlagen

Technologie

- Stuhlbewegungen sowohl mit dem Fußanlasser, Arztelementdisplay als auch von der Assistenzseite bedienbar
- Möglichkeit der Lichtstärkeneinstellung der OP-Lampe über den Lampenschalter anzupassen
- Inkl. Touchscreen Display Touch-Expert-Pro



Behandlungsplatz mit um 90 Grad klappbarer Fußstütze an der schwebenden Patientenliege mit Peitschensystem

(Behandlungstuhl hängt schwebend an der Wassereinheit)

Passen Sie Ihr Gerät an und wählen Sie aus verschiedenen Kopfpolstern Tray Ablagen, OP-Leuchten, Hygienesystemen usw.

Zum Patienten hin schwenkbares Mundspülbecken

Abnehmbares und sterilisierbares Mundspülbecken sowie Becheraufnahme

SOFT Polsterung mit Memory-Schaum

Kapazitive Tastatur des Helferinnenelements. Keine Folientastatur. Glatte Oberfläche

Höhenverstellbares Tablet

Kabelloser Fußanlasser


Leicht anmutender Arm mit einem breiten Spektrum an Bewegungspositionen

Schwingbügelsystem mit 3D-Bewegungsfreiheit der Schwingbügel

Android-Display Touch-Expert-PRO

Laterale, schwebende Stuhlfunktion für verbesserte Ergonomie während der Arbeit

Stuhl mit 90° klappbarer Fußstütze

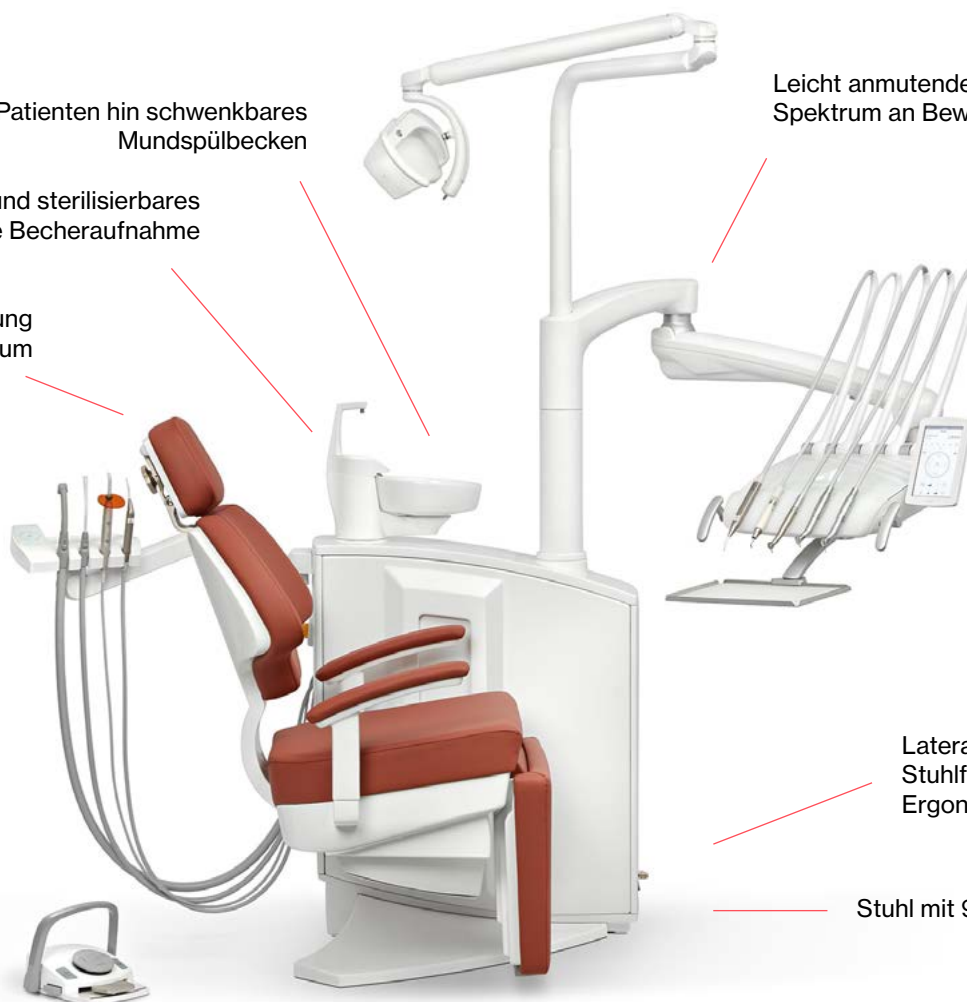



Ergonomie und Komfort

- Der Stuhl mit klappbarer und einstellbarer Fußstütze erleichtert den Patienten das Ein- und Aussteigen in den Behandlungsstuhl
- Hervorragend für kleine Räume, da der Behandlungsstuhl mit geklappter Fußstütze wenig Platz benötigt
- Ideal für Frontalaufnahmen am Patienten, da Sie sich zur Aufnahme optimal und vor dem Patienten positionieren können
- Bessere Frontalsicht auf den Patienten
- Lange Instrumentenschläuche mit 3D-Bewegungsfreiheit (von links nach rechts und umgekehrt)
- kabelloser Fußanlasser
- Um 70° schwenkbare Wassereinheit für besseren Zugang an den Patienten von beiden Seiten her
- Höhenverstellbares Helferinnenelement mit kapazitiver Tastatur
- Ergonomische Griffe für besseres Handling
- Selektives Saugsystem für die Absaugungsschläuche

Hygiene

- Mundspülbeckenkeramik, Becherfüllerrohr und Becherhalter sind abnehmbar
- Abziehbare und thermodesinfizierbare Absaugungsschläuche von bekannten Markenherstellern
- Geeignetes Design für einfache Reinigung und Desinfektion der Einheit
- Abnehmbare und desinfizierbare Trays für Instrumentenablage mit Silikoneinlagen

Technologie

- Stuhlbewegungen sowohl mit dem Fußanlasser, Arztelementdisplay als auch von der Assistenzseite bedienbar
- Möglichkeit der Lichtstärkeneinstellung der OP-Lampe über den Lampenschalter anzupassen
- Inkl. Touchscreen Display Touch-Expert-Pro



Behandlungsplatz mit schwebender Standardpatientenliege und hängenden Instrumentenschläuchen

(Behandlungstuhl hängt schwebend an der Wassereinheit)

Passen Sie Ihr Gerät
an und wählen Sie aus
verschiedenen Kopfpolstern
Tray Ablagen, OP-Leuchten,
Hygienesystemen usw.

Zum Patienten hin schwenkbares
Mundspülbecken

Abnehmbares und sterilisierbares
Mundspülbecken sowie Becheraufnahme

Kapazitive Tastatur des Helferinnenelements.
Keine Folientastatur. Glatte Oberfläche

Höhenverstellbares Tablet

SOFT Polsterung
mit Memory-Schaum


Kabelloser Fußanlasser

Leicht anmutender Arm mit einem breiten
Spektrum an Bewegungspositionen

Android-Display
Touch-Expert-PRO

Verstellbare, abnehmbare
und thermodesinfizierbare
Instrumententrays und
Silikonauflagen

Laterale, schwebende
Stuhlfunktion für verbesserte
Ergonomie während der Arbeit

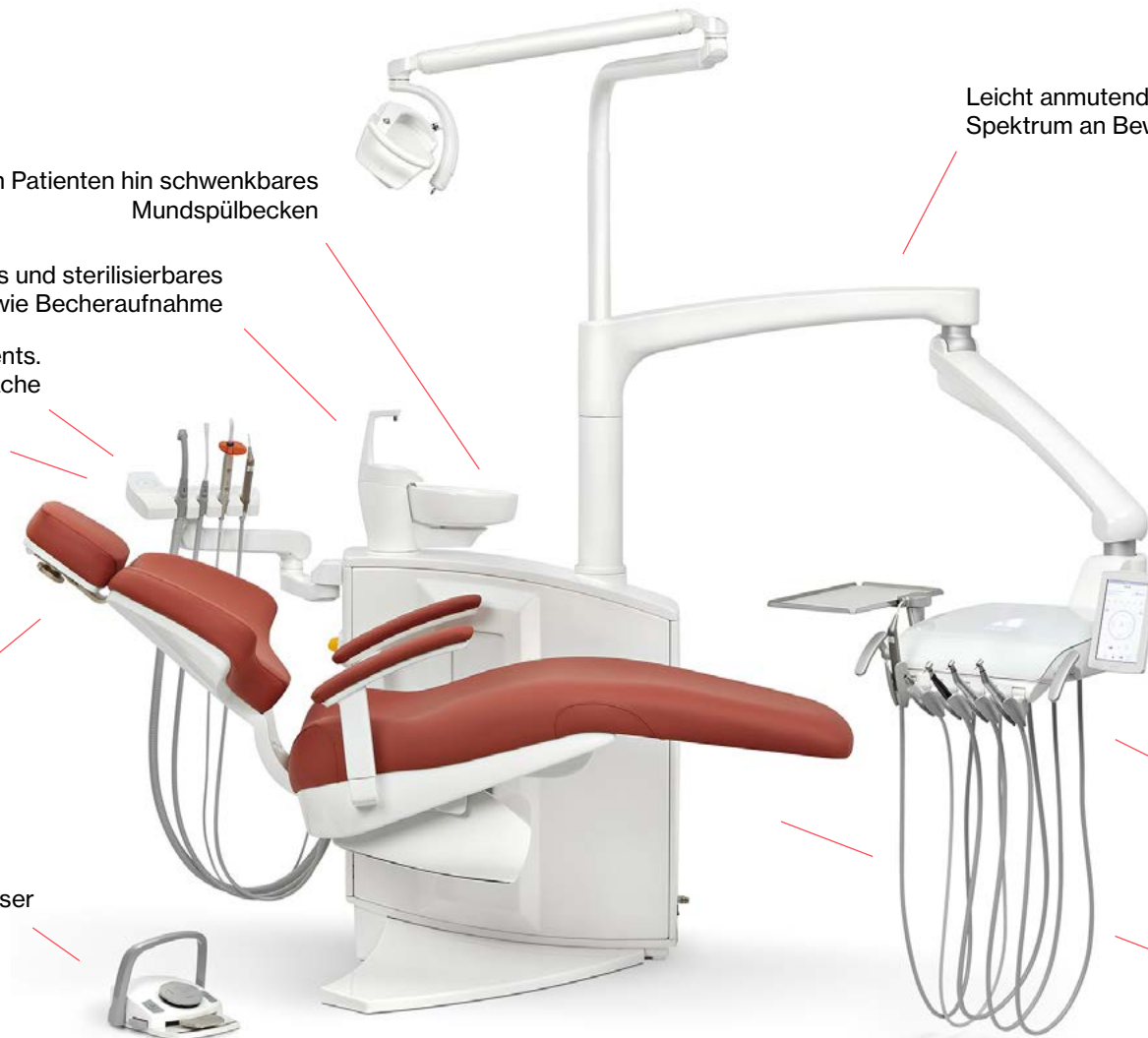



Ergonomie und Komfort

- Einstellbare, abnehmbare und desinfizierbare Instrumenten-Trays
- Inklusive kabellosem Fußanlasser
- Höhenverstellbarer Helferinnenarm mit kapazitiver Tastatur
- Sehr weiche Bewegung des Tragarms für den Arzttisch
- Ergonomische Griffe für besseres Handling
- Selektives, ventilgesteuertes Saugschlauchsystem (nur der entnommene Saugschlauch saugt auch)

Hygiene

- Mundspülbeckenkeramik, Becherfüllerrohr und Becherhalter sind abnehmbar
- Abziehbare und thermodesinfizierbare Absaugungsschläuche von bekannten Markenherstellern
- Geeignetes Design für einfache Reinigung und Desinfektion der Einheit
- Abnehmbare und desinfizierbare Trays für Instrumentenablage mit Silikoneinlagen

Technologie

- Stuhlbewegungen sowohl mit dem Fußanlasser, Arztelementdisplay als auch von der Assistenzseite bedienbar
- Möglichkeit der Lichtstärkeneinstellung der OP-Lampe über den Lampenschalter anzupassen
- Inkl. Touchscreen Display Touch-Expert-Pro



Behandlungsplatz mit um 90 Grad klappbarer Fußstütze an der schwebenden Patientenliege und hängende Instrumentenschläuche

(Behandlungstuhl hängt schwebend an der Wassereinheit)

Passen Sie Ihr Gerät an und wählen Sie aus verschiedenen Kopfpolstern Tray Ablagen, OP-Leuchten, Hygienesystemen usw.

Zum Patienten hin schwenkbares Mundspülbecken

Leicht anmutender Arm mit einem breiten Spektrum an Bewegungspositionen

Abnehmbares und sterilisierbares Mundspülbecken sowie Becheraufnahme

SOFT Polsterung mit Memory-Schaum

Kapazitive Tastatur des Helferinnenelements. Keine Folientastatur. Glatte Oberfläche

Höhenverstellbares Tablet


Kabelloser Fußanlasser

Android-Display Touch-Expert-PRO

Verstellbare, abnehmbare und thermodesinfizierbare Instrumententrays und Silikonauflagen

Laterale, schwebende Stuhlfunktion für verbesserte Ergonomie während der Arbeit

Stuhl mit 90° klappbarer Fußstütze

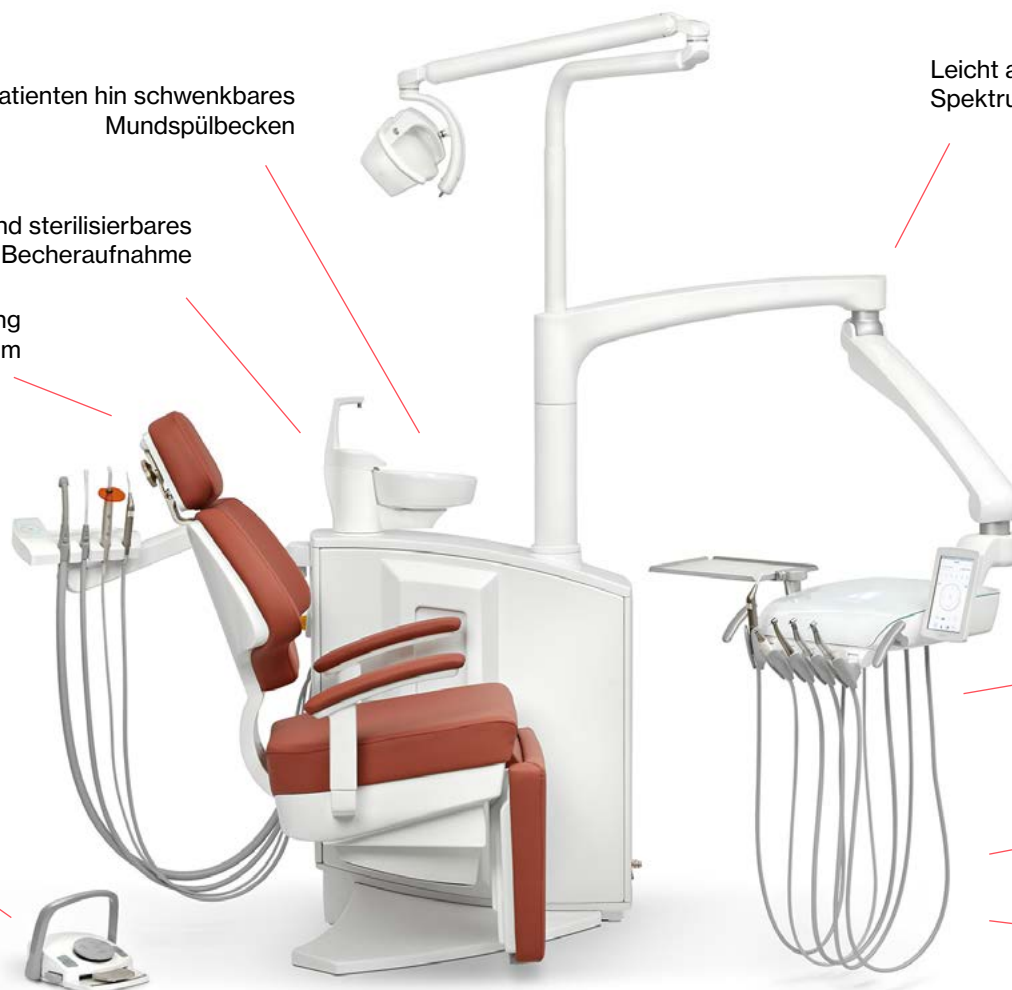



Ergonomie und Komfort

- Der Stuhl mit klappbarer und einstellbarer Fußstütze erleichtert den Patienten das Ein- und Aussteigen in den Behandlungsstuhl
- Hervorragend für kleine Räume, da der Behandlungsstuhl mit geklappter Fußstütze wenig Platz benötigt
- Ideal für Frontalaufnahmen am Patienten, da Sie sich zur Aufnahme optimal und vor dem Patienten positionieren können
- Bessere Frontalsicht auf den Patienten
- Einstellbare, abnehmbare und desinfizierbare Instrumenten-Trays
- Sehr weiche Bewegung des Tragarms für den Arzttisch
- Inklusive kabelloser Fußanlasser
- Höhenverstellbares Helferinnenelement mit kapazitiver Tastatur
- Ergonomische Griffe für besseres Handling
- Selektives Saugsystem für die Absaugungsschläuche

Hygiene

- Mundspülbeckenkeramik, Becherfüllerrohr und Becherhalter sind abnehmbar
- Abziehbare und thermodesinfizierbare Absaugungsschläuche von bekannten Markenherstellern
- Geeignetes Design für einfache Reinigung und Desinfektion der Einheit
- Abnehmbare und desinfizierbare Trays für Instrumentenablage mit Silikoneinlagen

Technologie

- Stuhlbewegungen sowohl mit dem Fußanlasser, Arztelementdisplay als auch von der Assistenzseite bedienbar
- Möglichkeit der Lichtstärkeneinstellung der OP-Lampe über den Lampenschalter anzupassen
- Inkl. Touchscreen Display Touch-Expert-Pro

S 5C

Behandlungsplatz mit schwebender Standardpatientenliege und Cart

(Behandlungstuhl hängt schwebend an der Wassereinheit)

Passen Sie Ihr Gerät an und wählen Sie aus verschiedenen Kopfpolstern Tray Ablagen, OP-Leuchten, Hygienesystemen usw.

Zum Patienten hin schwenkbares Mundspülbecken

Abnehmbares und sterilisierbares Mundspülbecken sowie Becheraufnahme

Kapazitive Tastatur des Helferinnenelements.
Keine Folientastatur. Glatte Oberfläche

Höhenverstellbares Tablet

SOFT Polsterung mit Memory-Schaum

Laterale, schwebende Stuhlfunktion für verbesserte Ergonomie während der Arbeit

Kabelloser Fußanlasser

Android-Display
Touch-Expert-PRO

Leicht höhenverstellbares Cart

Verstellbare, abnehmbare und thermodesinfizierbare Instrumententrays und Silikonauflagen





Ergonomie und Komfort


- Einstellbare, abnehmbare und desinfizierbare Instrumenten-Trays
- Inklusive kabellosem Fußanlasser
- Höhenverstellbarer Helferinnenarm mit kapazitiver Tastatur
- Ergonomische Griffe für besseres Handling
- Selektives, ventilgesteuertes Saugschlauchsystem (nur der entnommene Saugschlauch saugt auch)
- Leicht höhenverstellbares Cart

Hygiene

- Mundspülbeckenkeramik, Becherfüllerrohr und Becherhalter sind abnehmbar
- Abziehbare und thermodesinfizierbare Absaugungsschläuche von bekannten Markenherstellern
- Geeignetes Design für einfache Reinigung und Desinfektion der Einheit
- Abnehmbare und desinfizierbare Trays für Instrumentenablage mit Silikoneinlagen

Technologie

- Stuhlbewegungen sowohl mit dem Fußanlasser, Arztelementdisplay als auch von der Assistenzseite bedienbar
- Möglichkeit der Lichtstärkeneinstellung der OP-Lampe über den Lampenschalter anzupassen
- Inkl. Touchscreen Display Touch-Expert-Pro

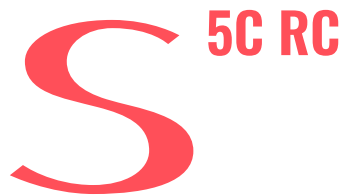

Behandlungsplatz mit um 90 Grad klappbarer Fußstütze an der schwebenden Patientenliege und Cart

(Behandlungstuhl hängt schwebend an der Wassereinheit)

Passen Sie Ihr Gerät an und wählen Sie aus verschiedenen Kopfpolstern Tray Ablagen, OP-Leuchten, Hygienesystemen usw.

Zum Patienten hin schwenkbares Mundspülbecken

Abnehmbares und sterilisierbares Mundspülbecken sowie Becheraufnahme

SOFT Polsterung mit Memory-Schaum

Kapazitive Tastatur des Helferinnenelements. Keine Folientastatur. Glatte Oberfläche

Höhenverstellbares Tablet

Laterale, schwebende Stuhlfunktion für verbesserte Ergonomie während der Arbeit

Kabelloser Fußanlasser

Android-Display Touch-Expert-PRO

Leicht höhenverstellbares Cart

Verstellbare, abnehmbare und thermodesinfizierbare Instrumententrays und Silikonauflagen

Stuhl mit 90° klappbarer Fußstütze





Ergonomie und Komfort

- Der Stuhl mit klappbarer und einstellbarer Fußstütze erleichtert den Patienten das Ein- und Aussteigen in den Behandlungsstuhl
- Hervorragend für kleine Räume, da der Behandlungsstuhl mit geklappter Fußstütze wenig Platz benötigt
- Ideal für Frontalaufnahmen am Patienten, da Sie sich zur Aufnahme optimal und vor dem Patienten positionieren können
- Bessere Frontalsicht auf den Patienten
- Einstellbare, abnehmbare und desinfizierbare Instrumenten-Trays
- Sehr weiche Bewegung des Tragarms für den Arzttisch
- Inklusive kabelloser Fußanlasser
- Höhenverstellbares Helferinnenelement mit kapazitiver Tastatur
- Leicht höhenverstellbares Cart
- Ergonomische Griffe für besseres Handling
- Selektives Saugsystem für die Absaugungsschläuche

Hygiene

- Mundspülbeckenkeramik, Becherfüllerrohr und Becherhalter sind abnehmbar
- Abziehbare und thermodesinfizierbare Absaugungsschläuche von bekannten Markenherstellern
- Geeignetes Design für einfache Reinigung und Desinfektion der Einheit
- Abnehmbare und desinfizierbare Trays für Instrumentenablage mit Silikoneinlagen

Technologie

- Stuhlbewegungen sowohl mit dem Fußanlasser, Arztelementdisplay als auch von der Assistenzseite bedienbar
- Möglichkeit der Lichtstärkeneinstellung der OP-Lampe über den Lampenschalter anzupassen
- Inkl. Touchscreen Display Touch-Expert-Pro

S

Patientenstuhl mit 90 Grad klappbarer Fußstütze (ohne Wassereinheit) und mit Cart



Desinfektions-und Amalgamabscheidung

Desinfektion des Wassersystems



Typ Metasys WEK

- Wasserdekontamination für Instrumentenschläuche.
- Kombinierte und automatische Dekontaminationszyklen von Wasserkreisläufen in rotierenden Instrumenten.
- Ungiftige kontinuierliche und effektive Dekontaminationswirkung.
- Automatische Überwachung der Dosierung.

Desinfektion von Saugschläuchen



Typ Metasys H1

- H1-System zur kontinuierlichen Reinigung und vollständigen Desinfektion des Saugsystems.
- Eine zusätzliche manuelle Desinfektion ist nicht erforderlich.
- H1 beinhaltet das automatische Saugschlauchwahlssystem.

Wasserversorgungssystem



**„Bottle“
Wasserversorgungssystem**

- Unabhängiges Wasserversorgungssystem für die Instrumente des Behandlungsplatzes.
- Der Wasserkreislauf des Geräts ist so ausgelegt, dass das Wasser bei einem Druckverlust nicht zurückfließen kann. Dadurch wird die Vermischung von Wasser aus verschiedenen Versorgungsquellen verhindert, sodass eine Kreuzkontamination mit Wasser aus dem öffentlichen Netz und umgekehrt ausgeschlossen ist.

Amalgamabscheidesysteme



Metasys MST 1

DÜRR CAS-1

- Integrierte Amalgamabscheidesysteme und Separiersysteme mit Platzwahlventil: Trocken- oder Nassabsaugung.

LED-Leuchten

Die neue Lampengeneration mit leistungsstarker LED-Technologie bietet zahlreiche Vorteile.

LED-Leuchten erzeugen eine natürliche Lichtqualität, die im Vergleich zu Halogenlicht eine klarere Sicht sicherstellen, da sie ein größeres Sichtfeld und weniger Schatten während der Behandlung liefern. Sie kühleres, weißeres Licht applizieren.

LED-Leuchten haben eine längere Lebensdauer als Halogenlampen, erzeugen nur wenig Wärme und verbrauchen weniger Energie.



**FARO
EVA**



**FARO
MAIA**



**G.COMM
POLARIS**

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

LICHTQUELLE	2 LED	2 LED	10 LED
FARBTEMPERATUR (°K)	von 2.700 K bis 5.700 K	5.000 K	von 4.200 K bis 5.800 K
BELEUCHTUNGSSTÄRKE (LUX)	von 11.000 bis 50.000 lux	von 3.000 bis 35.000 lux	von 8.000 bis 35.000 lux
FARBWIEDERGABEINDEX (CRI)	> 95	85	> 85
BELEUCHTETE FLÄCHE (MM)	190 x 100	170 x 85	140 x 70
STROMVERSORGUNG	24 VAC 50/60 Hz	17-24 VAC 50/60 Hz	12-24 VAC 50/60 Hz
VERBRAUCH	24 V CA 26 VA / 32 V CC 14 VA	9 VA	29 VA
GARANTIE	24 Monate	12 Monate	24 Monate
ZERTIFIZIERT GEMÄSS DER RICHTLINIE	93/42 CE Klasse I	93/42 CE Klasse I	93/42 CE Klasse I

Bildgebungssysteme



24 VDC, hochauflösender (1.280 × 1.024) 22"-LCD-Monitor. Langlebiges, vielseitiges Hochleistungsdisplay mit einer breiten Palette integrierter Videooptionen, das speziell für medizinische Umgebungen entwickelt wurde. Antireflektierendes optisches Glas, Metallgehäuse.



Monitorarm mit doppelter Drehachse und vertikaler Neigung.

Instrumente

Möglichkeit, Ihre Behandlungseinheit mit verschiedenen Instrumenten großer Marken zu konfigurieren:

Mikromotoren



Spritzen



Polymerisationslicht




Scaler



Turbinen

Kompatibel mit verschiedenen Marken.

Integrierter MORITA Apex-Locator

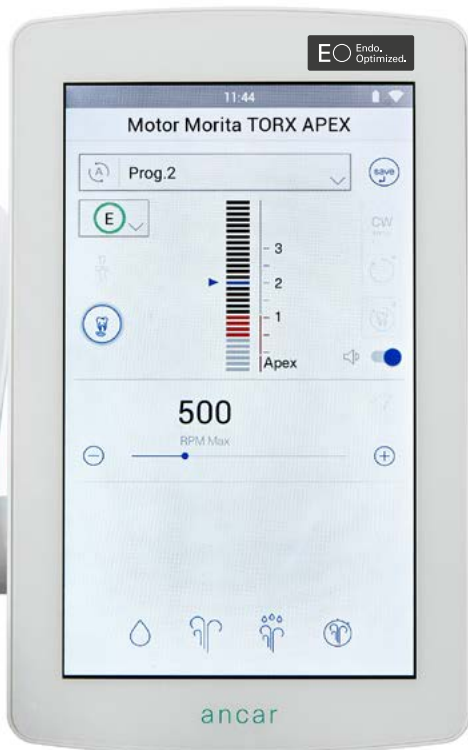

EO Endo. Optimized.

Wir stellen Ihnen die neueste Ergänzung unserer S-Line-Behandlungseinheiten vor:
Moritas integrierter Apex-Locator.

- Moritas Spitzentechnologie kann selbst die kompliziertesten endodontischen Fälle bewältigen.
- Verabschieden Sie sich von der Mühe, zusätzliche Maschinen oder Geräte in der Zahnarztpraxis zu haben oder Batterien überprüfen zu müssen und Kabel herumliegen zu haben.
- Der in den Behandlungsstuhl integrierte Apex-Locator spart Platz und macht Ihre Arbeit einfacher und effizienter. Alles, was Sie brauchen, ist an einem Ort.

Zusätzlich wird der Apex Locator mit einem der folgenden Pakete geliefert:

• Paket 1:

Apex-Locator
+ 1 Mikromotor mit Winkelstück
+ 1 Turbine mit Kupplung

• Paket 2:

Apex-Locator
+ 1 Mikromotor mit Winkelstück
+ 2 Turbinen mit Kupplungen

• Paket 3:

Apex-Locator
+ 2 Mikromotoren mit Winkelstücken
+ 1 Turbine mit Kupplung

S Line Tablett



Standardtablett

Mit W-H-C-Systemen möglich
350 x 230 mm



Großes Tablett

Mit W-H-C-Systemen möglich
410 x 310 mm



Doppeltes Tablett

Nur mit dem H-System möglich
(2 x) 350 x 230 mm



Tablett auf Assistentenstütze



Polsterungsfarben und -typen

Die SOFT-Reihe bietet folgende Farben:



Polsterfarben „Standard“:



Hocker

Möglichkeit der Polsterung mit den in unserer Farbpalette verfügbaren Farben.



Td 600




Td 700



Td 800

Optionale rechte Armlehne an der Patientenliege

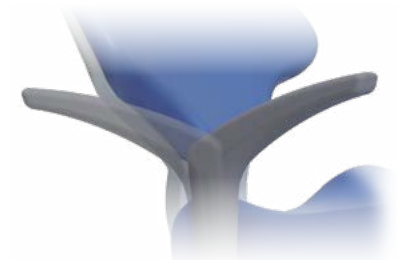

180° Drehung

Kopfstütze und Rückenlehne

Standardkopfstütze

In der Serienausstattung enthalten,
nachrüstbar auf die Kopfstütze mit 3D-Bewegung



Multifunktionale Kopfstütze mit Knickgelenk

Kopfstütze mit 3-D-Bewegung

Ergonomische Kopfstütze mit kugelförmiger
Bewegung und pneumatischer oder manueller
Bremse (optional)



170 mm vertikale Bewegung



S
by Ancar

**Rooted in Tradition,
Driven by Technology,
Crafted with Care**

ancar-s.com

Unser Versprechen

Ancar steht seit über 60 Jahren für Zuverlässigkeit und Qualität. Mit der Einführung der S Line treten wir in eine neue Ära ein. S steht für ausgewählte, technisch anspruchsvolle, smarte, starke Einheiten. Ancar steht für Anpassungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Qualität. All diese Werte bilden zusammen unser Motto: intelligente als auch zuverlässige Behandlungseinheiten zu konzipieren, die sich Ihrer Praxis sowie Arbeitsweise anpassen, ohne dabei unseren größten Vorteil zu vernachlässigen: die allgemeine Qualität unserer Produkte. Das macht Ancar aus.

Dafür stehen wir mit unserem Namen.

Antoni Carles - Präsident
Laura Solano - Produktionsleiter

www.ancar-s.com